



Stomafresh 05

Návod na obsluhu/Záruka

SK



Vážení zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu.
Návod spolu so záručným listom si uschovajte na budúce použitie.

Ústna/zubná sprcha



1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že ste si prečítali všetky pokyny.
- V prípade nerešpektovania návodu na použitie a pokynov v ňom uvedených hrozí riziko poranenia.
- Tento spotrebič vrátane príslušenstva je určený iba na účel uvedený v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za použitie spotrebiča, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu do prevádzky a nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení.
- Deti a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a poznatkov môžu používať zubné kefky vtedy, ak sa sledujú alebo boli poučení o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Spotrebiče na vyplachovanie úst môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovým alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a poznatkov pod dohľadom.
- Prístroje na vyplachovanie úst môžu používať len s chladnou alebo teplou vodou alebo špecifickými roztokmi, ako sa definuje v návode výrobcu na používanie. Pri použití horúcej vody hrozí riziko obarenia.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Spotrebič má vstavanú nabíjateľnú batériu a je nabíjateľný len z USB zdroja/napájacieho prívodu (adaptér s USB výstupom, PC s USB výstupom). Pred pripojením venujte pozornosť inštrukciám výrobcu týkajúce sa týchto zdrojov.
- Spotrebič sa musí napájať iba bezpečným malým napätím, ktoré zodpovedá označeniu na prístroji.
- Pre zvýšenú ochranu odporúčame nainštalovať do elektrického obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA.
- V prípade použitia predlžovacieho kábla sa vždy uistite, že nie je poškodený a vyhovuje platným normám.

- Napájací prívod nenechávajte visieť cez hranu stola, kde ho môžu stiahnuť deti.
- Napájací prívod pravidelne kontrolujte.
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným ohňom, nesmie byť ponáraný do vody a ani sa ohýbať cez ostré hrany.

1.2 Bezpečnosť používania



UPOZORNENIE! Pri nesprávnom použití spotrebiča hrozí riziko poranenia.

- Tento prístroj je určený na používanie v domácnosti.
- Nepoužívajte tento prístroj na iné účely ako ústna hygiena.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič/napájací prívod, ak je poškodený, spadol na zem, do vody, ak nepracuje správne. V takýchto prípadoch kontaktujte servisné centrum, aby preverili bezpečnosť jeho používania.
- Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Nepoužívajte poškodené alebo deformované príslušenstvo.
- Z hygienických dôvodov nepoužívajte jednu trysku pre viac osôb, mohlo by dôjsť k infekcií, zápalu ústnej dutiny.
- Napájací prívod nezasúvajte ani nevyťahujte do ani z elektrickej zásuvky mokrými rukami ani ťahaním za kábel.
- Nenabíjajte prístroj vonku ani blízko horúcich povrchov.
- Spotrebič uchovávajte, používajte, nabíjajte pri teplote medzi 0 až 40 °C a udržiavajte mimo dosahu ohňa. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
- Nikdy neponárajte spotrebič zapojený do nabíjacieho zdroja do vody ani inej tekutiny ani čiastočne!
- Spotrebič/napájací prívod/zdroj nikdy neumiestňujte ku ani na tepelné zdroje (napríklad sporák, kachle, radiátor, indukčná platňa atď.).
- Spotrebič s pripojeným nabíjacím prívodom sa nesmie používať ani nabíjať na miestach, kde by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo bazénu. Ak by prístroj do vody spadol, nevyberajte ho! Vytiahnite prívod z elektrickej zásuvky a až potom môžete prístroj vytriahnuť. Spotrebič odovzdajte na kontrolu špecializovanému servisu.
- Spotrebič sa nepokúšajte sami opravovať ani ho nijako upravovať, obráťte sa na špecializovaný servis.

- Pred výmenou príslušenstva, montážou, čistením, údržbou, plnením vodou alebo ak ho nechávate bez dozoru, ho vždy predtým odpojte z napájacieho prívodu.
- Spotrebič NIE JE určený na vonkajšie použitie.
- Spotrebič NIE JE určený do výbušného prostredia.
- Spotrebič NIE JE určený na komerčné použitie v ambulanciách pre zubných lekárov alebo iných zdravotníckych zariadeniach.
- Nenechávajte prístroj počas činnosti bez dozoru.
- Udržujte príslušenstvo (t.j. dýzy) mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Dýza je dostatočne malá, aby mohla uviaznuť v hrdle, prípadne by mohlo dôjsť k prehltnutiu. Osoba, ktorá prehltnie dýzu musí okamžite vyhľadať lekársku pomoc!
- Netlačte príliš na koniec dýzy ani na zuby a ďasná.
- Spotrebičom nestriekajte pod jazyk, do hrdla, ucha, nosa, očí alebo iných citlivých oblastí. Mohlo by dôjsť k zraneniu.
- Spotrebič ani príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov, len do ústnej dutiny.
- Spotrebič nezapínajte, ak je nádrž na vodu prázdna alebo ak je odmontovaná dýza.
- Nepreplňujte nádržku na vodu nad hranicu úrovne max.
- Nestriekajte vodou proti osobám, zvieratám, rastlinám alebo zariadeniam s elektrickými časťami alebo na napájacie prívody.
- Nikdy nenalievajte do nádržky horúcu vodu (max. 40 °C), hrozí riziko obarenia. Nikdy nenalievajte do nádržky ústne vody, vonné oleje, odvápnovacie prostriedky alebo iné chemické čistiace látky.
- Nevkladajte do nádržky cudzie predmety.
- Spotrebič po použití vždy dôkladne vyčistite.
- Pri preťažovaní alebo používaní prístroja v extrémne vysokých teplotách môže dôjsť k úniku elektrolytu z akumulátora. Ak sa elektrolytom znečistíte, zasiahnuté miesto umyte vodou a mydlom, opláchnite citrónovou šťavou alebo octom. V prípade znečistenia očí ich niekoľko minút vyplachujte čistou vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nepoužívajte ani nenabíjajte spotrebič, ak z batérie uniká elektrolyt.
- Spotrebič nabíjajte len pri bežnej izbovej teplote.
- Nevystavujte spotrebič teplotám vyšším ako 50 °C, aby ste nepoškodili batérie.
- Spotrebič s batériou nevhadzujte do ohňa, hrozí **NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU !**

Informácie

Dentálna hygiena zahŕňa množstvo úkonov, ktoré sú pre nás preventívnymi opatreniami pred tvorbou zubného kazu. Na ich vykonávanie môžeme použiť okrem klasickej zubnej kefky, medzizubnej kefky či zubnej nite aj mnohé iné inovatívnejšie pomôcky. Jednou z nich je práve ústna sprcha.

Čo je to ústna sprcha?

Ak ste ešte o ústnej sprche nepočuli, prečítajte si tieto stručné informácie. Ústna sprcha je šikovnou dentálnou pomôckou, ktorou môžete nahradiť používanie ústnej nite, či medzizubnej kefky.

Ako je to možné?

Ústna sprcha dokáže prostredníctvom tlaku vody vyčistiť medzizubné priestory a línie ďasien. Čistenie medzizubných priestorov je pri našej ústnej hygiene nevyhnutnosťou, sú totiž dokonalým prostredím pre baktérie, ktoré spôsobujú tvorbu zubného kazu. Ďalšou výhodou ústnej sprchy, za ktorú od nás dostáva plusové body, je jej masážna schopnosť. Po jej použití budú vaše ďasná prekrvené a posilnené.

Ústna sprcha je tou ideálnou voľbou aj pre tých, ktorí nosia zubné strojčeky, korunky, mostíky, či implantáty. Umožňuje totiž detailné vyčistenie všetkých priestorov v ústnej dutine.

Napájanie

Napájanie zo vstavanej nabíjateľnej batérie

Zariadenie je napájané zo vstavanej nabíjateľnej batérie. Pred prvým použitím alebo vždy, keď je batéria slabá (zariadenie sa svojvoľne vypne, alebo sa nedá zapnúť), batériu nabite.

Zariadenie je vodotesné. Je elektricky bezpečné a je určené na používanie v kúpeľni.

Pred prvým použitím nabite batériu v zariadení.

Používajte nabíjačku (nedodávaná) podľa požiadaviek uvedených v technických údajoch.


Pri používaní v zahraničí používajte správnu zástrčku podľa dostupnej elektrickej zásuvky a skontrolujte, či je napätie v danej krajine vhodné pre danú nabíjačku.

Pred nabíjaním zariadenie najskôr vypnite.


- Otvorte vodotesný kryt nabíjacieho USB-C konektora na zariadení a jeden konektor dodávaného USB kábla (USB-C) pripojte pevne do nabíjacieho konektora na zariadení a druhý konektor do nabíjačky (AC adaptéra) (nedodávaný). Ak je v nabíjacom konektore voda, pred pripojením USB kábla konektor utrite a osušte.



Ak súčasne blikajú štyri indikátory, batéria je takmer vybitá.

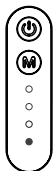

Počas nabíjania sa postupne rozsvetujú štyri indikátory. Nabíjanie.

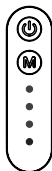

Po nabití súčasne svietia všetky štyri indikátory. Batéria je úplne nabitá.


- Po nabití odpojte zariadenie z USB kábla a odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky.
- Úplné nabitie batérie pomocou nabíjačky (nedodávaná) trvá cca dve až štyri hodiny v závislosti od konkrétnych okolností.
- Ak zariadenie nebudete používať dlhší čas a potom ho začnete nabíjať, indikátory nabíjania nemusia začať ihneď svietiť (blikať). Je to normálne a neznamená to poruchu. Po pár minútach nabíjania sa indikátory začnú postupne rozsvetovať.


AKO DOSIAHNUŤ ČO NAJDLHŠIU ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE

Na zaistenie čo najdlhšej životnosti batérie odporúčame:

- Batériu uchovávať, používať a nabíjať pri izbovej teplote. Príliš vysoké teploty môžu negatívne ovplyvniť jej životnosť.
- Nenechávať batériu zbytočne dlho úplne nabitú alebo úplne vybitú mimo prevádzky.
- Neudržiavať batériu neustále úplne nabitú.
- Batériu úplne nevybíjať.

Popis častí

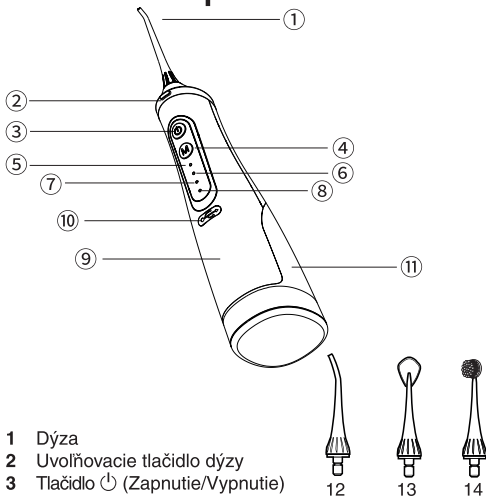


- 1 Dýza
- 2 Uvolňovacie tlačidlo dýzy
- 3 Tlačidlo  (Zapnutie/Vypnutie)
- 4 Tlačidlo **M** (Prepínanie režimu)
- 5 LED indikátor režimu **Pulse** (Pulzný režim)
- 6 LED indikátor režimu **Soft** (Jemný režim)
- 7 LED indikátor režimu **Normal** (Štandardný režim)
- 8 LED indikátor režimu **Power** (Výkonný režim)
- 9 Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovou povrchovou úpravou/telo zariadenia
- 10 Nabíjací konektor USB-C s vodotesným krytom
- 11 Nádržka na vodu/podstavec
- 12 Dýza štandardná - na bežné každodenné použitie, hĺbkové čistenie štrbín a nečistôt na zadných zuboch
- 13 Dýza na čistenie jazyka
- 14 Dýza s kefkou - vhodná pre ľudí so zubnými strojčkami a protézami. Pri vyplachovaní a čistení zubov môžete kefkou používať aj so zubnou pastou.


Používanie ústnej sprchy



- 1** Pred použitím nasadíte dýzu na hrdlo dýzy na zariadení tak, aby správne zacvakla.



- 2** Otvorte nádržku na vodu a naplňte ju vodou. Nenapíňajte ju horúcou vodou (s teplotou nad 40 °C), soľou, olejom ani chemikáliami. Po naplnení vody zatvorte nádržku.

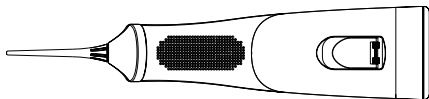

- 3** Stláčaním tlačidla výberu režimu **M** vyberte želaný režim. Vložte dýzu do úst a stlačením tlačidla  zapnite zariadenie a začnite čistiť ústnu dutinu a zuby.

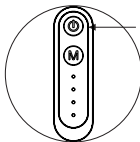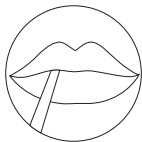

Výber režimu

Predvolený režim zapnutia je pulzný. Stláčaním tlačidla výberu režimu **M** sa zariadenie bude prepínať medzi jednotlivými režimami **Pulse**, **Soft**, **Normal** a **Power** zhora nadol. Pri prvom použití zariadenia odporúčame najskôr vyskúšať jemný režim (**Soft**).

• **Režim Pulse (Pulzný režim)**

Tento režim je určený na ošetrovanie oblastí medzi zubami, aby sa odstránili baktérie a zubný kameň. Namierte vodný lúč na oblasť medzi zubami. Prejdite dýzou z prednej a zadnej strany zubov. Úplne plná nádržka na vodu postačuje na približne 1 minútu používania.

• **Režim Soft (Jemný režim)**

Tento režim je určený na jemnú masáž ďasien. Jemne stimulujte problémové oblasti nasmerovaním dýzy na postihnuté miesto.

• **Režim Normal (Normálny režim)**



Tento režim je určený na ošetrovanie zamerané na periodontálne kapsy, odstránenie baktérií a zubného povlaku. Prúd vody nasmerujte do priestoru medzi zubami a líniou ďasien.


Pomaly prechádzajte prúdom vody pozdĺž línie ďasien. Vyčistíte prednú a zadnú časť zubov aj za stoličkami. Problémové oblasti ďasien potom dočistíte v režime **Soft**.

• **Režim Power (Výkonný režim)**

Tento režim je určený na silnú masáž ďasien. Výrazne stimulujte problémové oblasti nasmerovaním dýzy na postihnuté miesto a silným prúdom vody prekrví a dôkladne vyčistí problémové partie.

- 4 Pri používaní sa mierne predkloňte a pootvorte ústa, aby voda mohla vyteciť alebo aby ste ju mohli z úst prirodzene vyplúť. Pri čistení zubov stojte alebo sedzte, neotvárajte ústa úplne, aby vám voda netiekla na telo alebo tvár. Pre najlepší účinok začnite s čistením od stoličiek (zadných zubov) po predné zuby. Pri čistení zubov pozdĺž línie ďasien zariadenie používajte krátko v medzizubnom priestore, aby ste sa uistili, že oblasť okolo ďasna a medzi zubami je čistá.

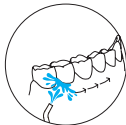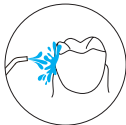

- 5 Po skončení čistenia vypnite zariadenie stlačením tlačidla . Po vypnutí zariadenia LED indikátory zhasnú.
- 6 Po ukončení používania sa uistite, že je zariadenie vypnuté a vyčistite ho podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
Potom zariadenie uskladnite, aby bolo pripravené na ďalšie použitie.

Po každom použití

- 1 Zariadenie vypnite.
- 2 Otvorte/vyberte nádržku na vodu a vyprázdňte ju.
- 3 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo dýzy (2) na vrchnej strane zariadenia a vyberte dýzu z hrdla dýzy na zariadení.
- 4 Dýzu opláchnite pod tečúcou vodou.
- 5 Z dýzy, vonkajšej strany zariadenia/rukoväte a nádržky osušte všetku zvyšnú vodu.
- 6 Nasadte dýzu späť na hrdlo dýzy alebo ju uskladnite zvlášť.

Poznámka

Aby sa zariadenie dôkladnejšie vysušilo, nechajte nádržku otvorenú.

Výmena dýzy

- 1 Zariadenie vypnite.
- 2 Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie dýzy (2) a vytiahnite smerom nahor pôvodne použitú dýzu.
- 3 Nasadte vami zvolenú dýzu tak, aby zacvakla.

Otázky a odpovede

Upozornenie!

Ak sa vyskytnú nejaké problémy s týmto zariadením, pokúste sa ich odstrániť pomocou tohto prehľadu.

Ak opatrenia nepomôžu, nepokúšajte sa odstrániť kryt zariadenia alebo ho opraviť sami. Hrozí riziko straty záruky.

Prečo zariadenie nefunguje?

- Zariadenie možno nie je nabité. Nabíjajte ho prvýkrát až do úplného nabitia a potom vždy po vybití batérie cca 2 - 4 hodiny.
- Možno v zásuvke nie je elektrina. Prívod elektriny do zásuviek v zrkadlových skrinkách nad umývadlami alebo do zásuviek na holenie v kúpeľniach sa často odpája vypnutím svetla.

Môžem v nádržke použiť ústnu vodu alebo esenciálne oleje?

- Používanie esenciálnych olejov v nádržke sa neodporúča. Ústnu vodu je možné zmiešať s vodou a použiť v nádržke. Po použití zmesi s ústnou vodou je potrebné čiastočne naplniť nádržku teplou vodou, zapnúť výrobok s nastavcom namiereným do umývadla a počkať, kým sa nádržka nevyprázdni, aby sa predišlo upchatiu zariadenia.

Budú iné dýzy vhodné na použitie so zariadením?

- V spojení s týmto zariadením je možné používať len dodávanú dýzu. Dýzy iných značiek nie sú s týmto zariadením kompatibilné. Kontaktujte predajcu.

Zdá sa mi, že zariadenie je menej výkonné. Prečo?

- Možno je potrebné vymeniť batériu. Kontaktujte predajcu.
- Možno je potrebné vymeniť dýzu. Kontaktujte predajcu.

Prečo zariadenie počas čistenia mení výkon?

- Možno že nechtiac prepínate režimy tlačidlom **M**. Rôzne režimy majú iný zvuk a výkon.

Ako často je potrebné vymieňať dýzu?

- Dýzu odporúčame vymieňať po 6 mesiacoch používania. Ďalšie informácie o kúpe náhradných dielov vám poskytne predajca.

Čistenie a údržba

- Z hygienických dôvodov čistite zariadenie pravidelne po každom použití.
- Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Na čistenie ústnej sprchy používajte vodu s teplotou do 50 °C alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Na čistenie nepoužívajte drôtenky, riedidlá alebo čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom a pod., aby nedošlo k poškodeniu čisteného povrchu. Pri čistení neponárajte ústnu sprchu do vody.

NÁDRŽKA NA VODU

- Po každom použití úplne vyprázdňte nádržku na vodu, aby sa v nej nemohli množiť baktérie. Nádržku umyte vodou, utrite ju čistou suchou handričkou a nechajte ju odkvapkať a vysušiť.
- Ak ste pri použití ústnej sprchy naliali do nádržky ústnu vodu alebo jej roztok, je nutné nádržku riadne vypláchnuť. Odporúčame naplniť nádržku čistou vodou, uviesť sprchu do prevádzky a všetok obsah nádržky nechať vyčerpať do umývadla. Nádržku potom umyte vodou, utrite ju čistou suchou handričkou a nechajte ju odkvapkať a vysušiť.

TELO

- Telo zariadenia utrite čistou suchou handričkou. V prípade silnejšieho znečistenia môžete použiť trochu navlhčenú handričku. Vyčistený povrch potom riadne vytrite dosucha. Priestor na uloženie nádržky na vodu vrátane nasávacej hadičky vždy utrite dosucha. Nasávaciú hadičku neohýbajte, neťahajte za ňu ani ju nekrúťte!

Upozornenie!

Telo nie je určené na umývanie pod tečúcou vodou. Ústnu sprchu nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

Dýza

- Po každom použití vypláchnite použitú dýzu vodou, aby ste zamedzili tvorbe usadenín. Následne umyte povrch dýzy vodou a potom ju mäkkou utierkou vždy utrite dosucha. Z hygienických dôvodov odporúčame každých šesť mesiacov vymeniť používanú dýzu za novú. Kontaktujte predajcu.

SKLADOVANIE

- Po ukončení používania ústnu sprchu očistite podľa vyššie uvedených pokynov. Ústnu sprchu skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. Ak chcete ústnu sprchu odložiť na dlhší čas, odporúčame nádržku na vodu vybrať.

Upozornenie!

- Na čistenie žiadnych častí nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Môže dôjsť k narušeniu a poškodeniu povrchovej úpravy zariadenia.

Technické údaje

Napájanie:

Menovité napätie: jednosmerné, vstavaná Li-ion batéria, 1 500 mAh, 3,7 V

Nabíjacie napätie: jednosmerné, 5 V
(vhodný AC adaptér/nabíjačka, nedodávaný)

Menovitý príkon: 6 W

Pracovný tlak: 2,7 - 8,9 barov

Trieda ochrany: III

Ochrana proti vode: IPX7

Rozmery: 24,1 × 8,4 × 7 cm

Hmotnosť: 310 g

Objem nádržky: 310 ml

Priemer dýzy: 0,6 mm

Hlučnosť: 60 dB

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 60 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Príslušenstvo:

Stomafresh 05 1 ks

Nabíjací kábel 1 ks

Dýza s kefkou 1 ks

Dýza na čistenie jazyka 2 ks

Štandardná dýza 2 ks

Návod na obsluhu 1 ks

Právo na zmeny vyhradené!

Na zariadení a v sprievodnej dokumentácii sú použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje, že elektrické zariadenie používa na svoju prevádzku bezpečné malé napätie.

IPX7

Toto označenie elektrického zariadenia znamená, že zariadenie je vyhotovené s vonkajším krytom, ktorý ho chráni pred vniknutím vody. V tomto prípade ide o úroveň ochrany pred ponorením do vody (počas 30 minút v hĺbke 1 metra).

Výrobca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ



Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného domového odpadu. Odovzdajte ich na likvidáciu v zmysle platných predpisov a noriem na miestach ich spätného odberu.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.