

Dětská odsávačka hlenů

Uživatelská příručka

KA1001



Bezpečnostní instrukce

- Tento přístroj je určen k čištění nosní dutiny a nosních derivátů dítěte.
- Zabraňte vniknutí pevných a tvrdých předmětů o průměru nad 3 mm.
- Neházejte s přístroj, přístroj se tak může zničit.
- Příslušenství používejte výhradně od stejného výrobce, v opačném případě může dojít ke zničení přístroje.
- Tento předmět neslouží jako hračka. Uchovejte ho v bezpečí a nenechte své děti si s přístrojem hrát.



Bezpečnostní pokyny před použitím

- Doporučujeme sací hubici a sběrný pohárek před použitím sterilizovat, například namočením do vroucí vody o teplotě 212 °F / 100 °C na několik minut. Až pak teprve jej nasadit na hlavní tělo zařízení a používat. K dezinfekci nepoužívejte vysokoteplotní přístroje, jako jsou mikrovlnné trouby, atd.
- Výrobek neponořujte celý do vody
- Zkontrolujte, zda není poškozeno těsnění a zda je příslušenství kompletní..
- Před použitím si umyjte ruce

Funkce

- Tento výrobek je zcela nový produkt na čištění nosní dutiny, který je měkký, účinný a snadno se čistí. Může čistit nosní dutinu kojenců a dětí za bezpečných a pohodlných podmínek.
- Tento produkt je vybaven třemi úrovněmi sací síly, které lze nastavit v závislosti na nosní dutině.
- Výrobek vydává krásnou hudbu, která umožňuje dětem čistit nosní dutinu v uvolněné atmosféře.
- Nástavec na blistr a odsávačka vyrobená z food-grade materiálů jsou bezpečné a hygienické, snadno se ovládají a snadno udržují nosní dutinu dítěte čistou.


Způsob skladování výrobku

- K čištění tohoto výrobku používejte čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo saponát..
- Sací hubici a sběrný pohárek lze dezinfikovat vařící vodou nebo párou, nelze je však dezinfikovat v mikrovlnné troubě.
- Tělo přístroje není voděodolné. Neumývejte jej vodou ani jej nečistěte ve vysokých teplotách. K čištění použijte jemný vlhký hadřík.
- Přístroj neskladujte na přímém slunci nebo ve vlhkém prostředí.
- Vyhněte se používání korozivních chemikálií na čištění.

Struktura produktu




• Tři vyměnitelné trysky

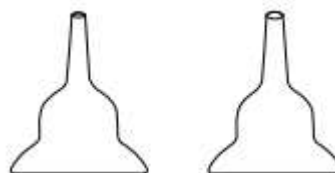

Tryska s kulatým otvorem

Speciální pro vnitřní nosní dutinu

Existují dvě velikosti, použijte prosím vhodnou trysku podle velikosti nosní dírky dítěte.

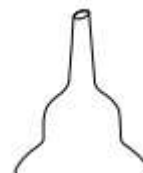

Šikmá ústní tryska

Používá se k čištění soplů nebo odsávání hustých sekretů.

• Instrukce k obsluze

1. Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje: zmáčkněte ⑦ tlačítko pro zapnutí přístroje a zmáčkněte ještě jednou pro jeho vypnutí;
2. Nastavení síly sání: Klikněte na tlačítko ⑧ regulace odsávání pro nastavení intenzity, k dispozici 3 stupně intenzity;
3. Přehrávání hudby: Stiskněte ⑨ tlačítko hudby, které zapne přehrávání. Pro vypnutí znovu stiskněte stejné tlačítko;
4. Tlačítko sání: Stiskněte ⑩ tlačítko sání pro zapnutí funkce čištění nosní dutiny. Pro vypnutí stiskněte ještě jednou;
5. Nabíjení přístroje: K nabíjení zařízení použijte stejnosměrný proud 5 V 1A.

Poznámka (přečtěte si důkladně)

- ▲ Během používání přístroje se ujistěte, že ústa dítěte jsou otevřená. Zajistíte tak cirkulaci vzduchu v nosní dutině a zabráníte nepříjemným pocitům způsobeným tlakem v hlavě.
- ▲ Během práce s přístrojem, nezakrývejte dítěti druhou nosní dírku. Můžete tak způsobit nepříjemné pocity a bolest hlavy.
- ▲ Ujistěte se, že je přístroj před každým použitím umytý.
- ▲ Po použití dezinfikujte sací trysku a průhledný sběrný kelímek, abyste zabránili infekci.
- ▲ Neponořujte celý přístroj do vody.
- ▲ Pokud naplníte sběrný kelímek do poloviny, před pokračováním byste ho měli vyprázdnit a vyčistit. Zabráníte tak nasátí nosních nečistot do motoru a poškození výrobku.

Parametry produktu

Jméno produktu: Dětská odsávačka hlenů

Model produktu: KA1001

Napětí: 3.7V

Nabíjecí napětí: DC 5V 1A

Maximální síla: 1.5W

Kapacita baterie: 500mAH

Hmotnost produktu: 150g

Rozměry produktu: L207×W41.5×H49mm

Časté problémy

Pokud se objeví některý z následujících problémů, postupujte podle následujících doporučení. Pokud daný problém v tabulce nenajdete, kontaktujte naše reklamační oddělení.


Problém	Řešení
Zařízení nesaje	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda je tryska nainstalována na správném místě.2. Zkontrolujte, zda sběrný kelímek je správně nainstalován.3. Zkontrolujte, zda není blokován ventilační otvor.4. Zkontrolujte, zda není poškozený těsnící kroužek.
Zařízení se nezapíná	Přístroj před použitím nabijte.

Dětská odsávačka hlenů

Rychlý průvodce

Popis komponentů

- Tělo přístroje

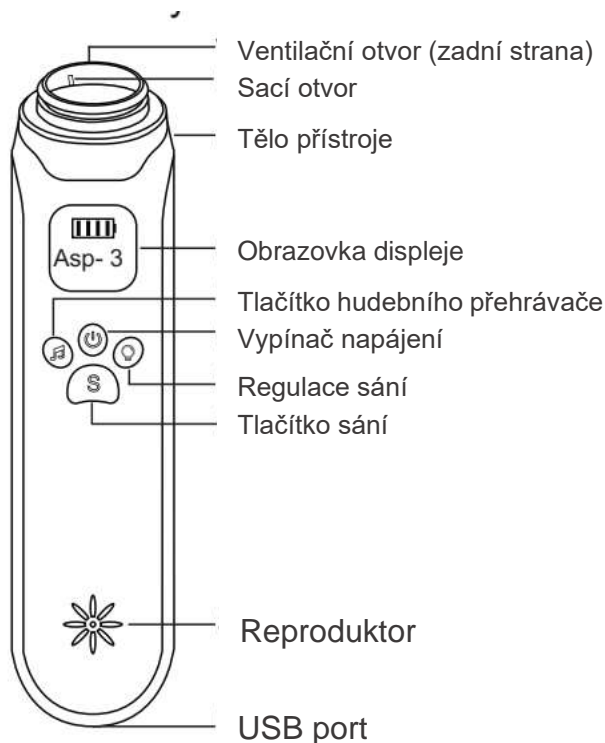


- Příslušenství



Sběrná nádoba


3 vyměnitelné trysky

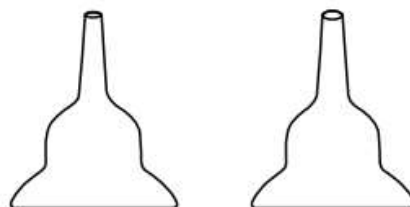

Tryska s kulatým otvorem

Speciální pro vnitřní nosní dutinu

Existují dvě velikosti, použijte prosím vhodnou trysku podle velikosti nosní dírky dítěte.

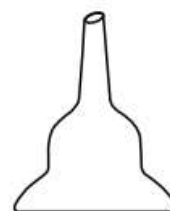

Šikmá ústní tryska

Používá se k čištění soplů nebo odsávání hustých sekretů.



USB nabíjecí kabel


Kroky




1. Vložte základnu do těla přístroje, otočte jej po směru hodinových ručiček a utáhněte. Poté nainstalujte na základnu těsnící víko.




2. Zaklapněte ochrannou krytku na tělo přístroje a upevněte jí otáčením ve směru hodinových ručiček.

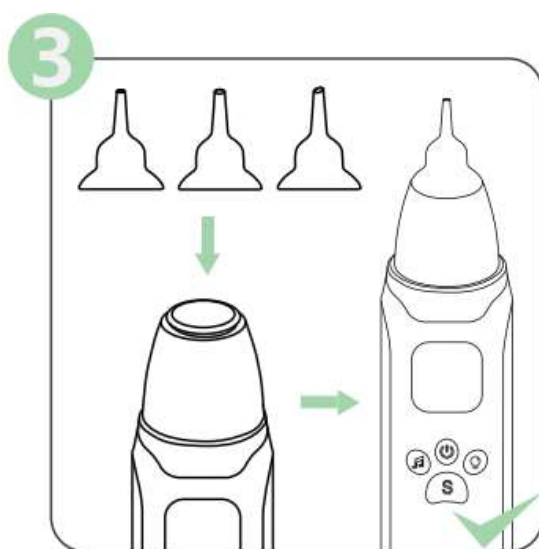

3. Vyberte si jednu z vyměnitelných trysek a nainstalujte ji na sběrnou nádobu.

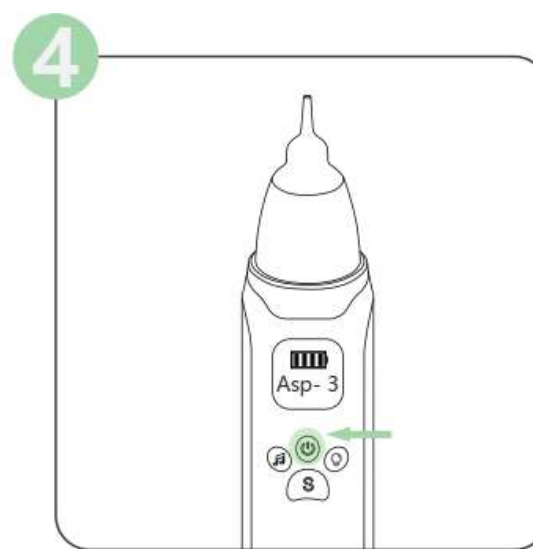

4. Zmáčkněte tlačítko napájení pro zapnutí přístroje

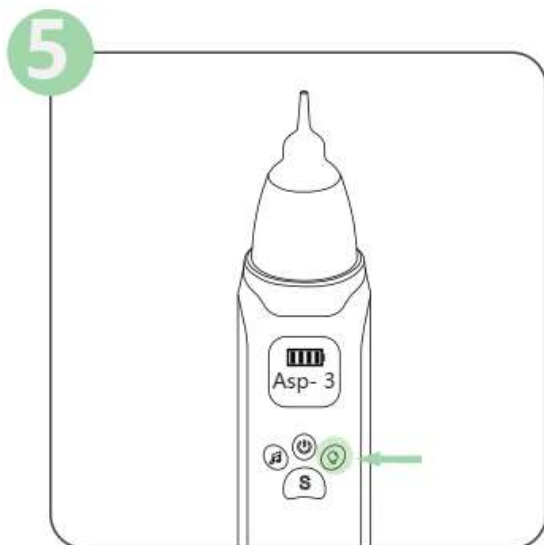

5. Vyberte si jeden ze 3 stupňů intenzity.



6. Zmáčkněte tlačítko pro přehrávání hudby. Tento krok může být přeskočen. Hudba dokáže zaměstnávat mysl dítěte a odsávání tak může být jednodušší.




7. Zmáčkněte tlačítko sání.



8. Umístěte trysku do nosní dutiny a vyčistěte ji pomocí přístroje.

Detaily užívání

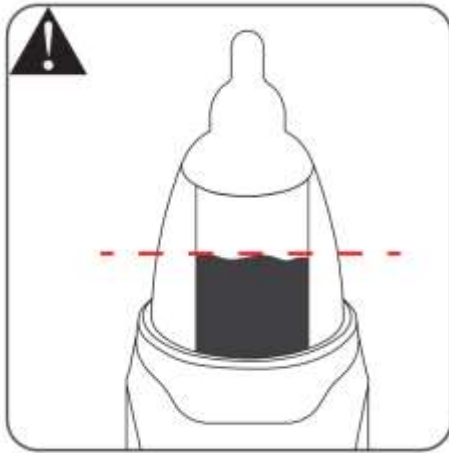

Poznámka: Pokud se sběrná nádoba během čištění nosní dutiny zaplní po polovinu, zastavte odsávání a vyčistěte nádobu. Pokračujte v odsávání až po vyčištění. Pokud tak neučiníte hrozí riziko zpětného toku .



Tip: Pro dezinfekci vyměnitelných trysek a sběrného kelímku použijte vařící vodu nebo páru. Můžete tak předejít bakteriální infekci. Pro čištění nepoužívejte mikrovlnou troubu. Tyto součásti jsou však možné čistit v myčce na nádobí, ale stupeň umývání nesmí překročit 212°.



Poznámka: Tělo přístroje není voděodolné. Neoplachujte vodou ani nečistěte při vysoké teplotě. Tělo můžete vyčistit pomocí vlhkého hadříku.




Tip: Po použití vyčistěte vyměnitelné trysky a sběrný kelímek horkou vodou, zamezí se tak množení bakterií.

Baby Nasal Aspirator

Baby Nasal Aspirator Manual

KA1001

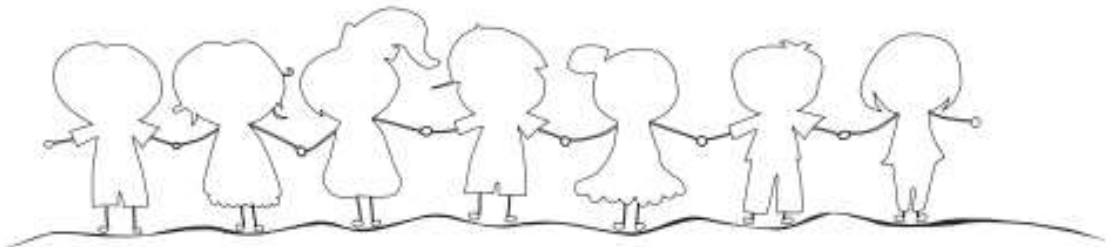

Safety instructions for use

- This product is only used to clean the nasal cavity and derivatives of the baby's nasal cavity.
- Prevent solid and hard objects above 3mm from entering the nozzle.
- Please don't throw away randomly, so as not to damage the product.
- Please use the accessories provided by the manufacturer to avoid damage to the machine due to inconsistent accessories.
- This product is not a toy, please keep it in a safe place and do not let children play.



Precautions before use

- It is recommended to sterilize the suction nozzle and collection cup before use, such as soaking in boiling water at 212°F / 100°C for a few minutes and then install it on the main body of the equipment for use. Do not use high-temperature machines such as microwave ovens for detoxification..
- Do not immerse the whole product in liquid.
- Please check whether the seal is damaged and the accessories are complete.
- Wash your hands before use


Features

- This product is a brand-new nasal cavity cleaning product, which is soft, efficient and easy to clean. It can clean the nasal cavity of babies and children under safe and comfortable conditions.
- The product is equipped with three levels of suction strength, which can be adjusted according to the nasal cavity.
- The product can emit beautiful music, allowing babies to clean their nasal cavity in a relaxed atmosphere.
- The blister cup and suction nozzle made of food-grade materials are safe and hygienic, easy to operate, and easy to keep the baby's nasal cavity clean


Product preservation method

- Please use cleaning agents such as alcohol or detergent to clean this product.
- The suction nozzle and collection cup can be disinfected with boiling water or steam, but cannot be disinfected with a microwave oven.
- The main body of the product is not waterproof. Do not wash with water or clean at high temperatures. Please use a soft wet towel to wipe the main body of the product for cleaning.
- Avoid storing the product in direct sunlight and humid environment.
- Avoid using corrosive chemicals to clean this product

Product structure

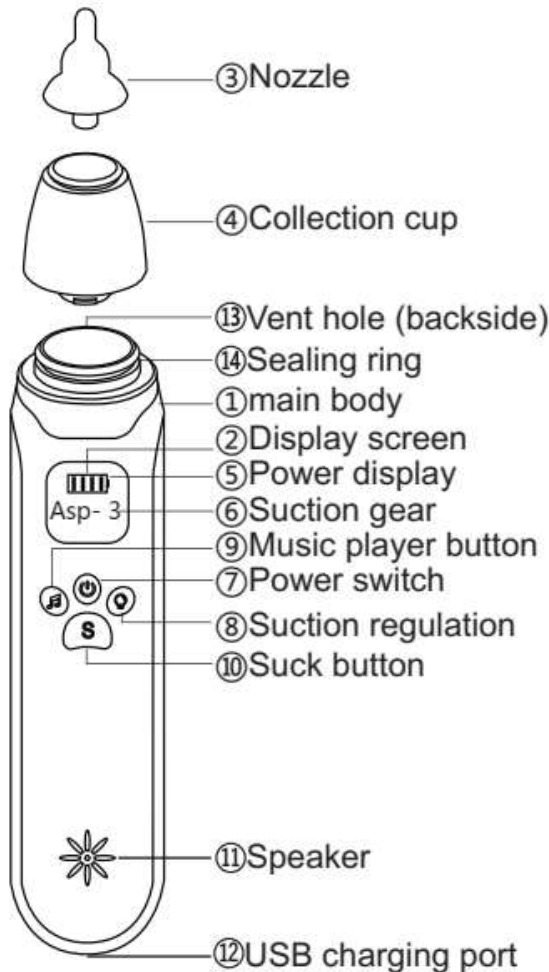


▲ Three replaceable nozzles

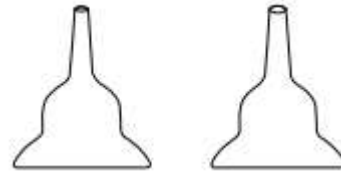

Round hole nozzle

Special for internal nasal cavity
There are two sizes, please use the appropriate nozzle according to the child's nostril size.

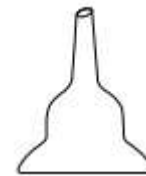

Oblique mouth nozzle

Used to clean snot or suck out thick secretions.

- Operation instructions

9. Turn on/off: click ⑦ on/key to turn on the device, and click again to turn off the device to cycle;
10. Gear position adjustment: Click the ⑧ gear position adjustment button to set the gear position intensity, 1-3 gears are cycled in turn;
11. Music playback: Click the ⑨ music playback button to turn on the music playback, and click again to turn off the music;
12. Inhale button: click the ⑩ inhale button to turn on the inhalation function to clean the nasal cavity, and click again to turn off the inhalation function;
13. Device charging: Use DC 5V 1A to connect to the USB charging socket to charge the device.

Note (please read carefully before use)

- ▲ During use, make sure that the baby's mouth is opened to ensure air circulation in the nasal cavity to avoid discomfort caused by negative pressure on the head.
- ▲ When the nasal aspirator is working, do not block the other nostril, so as to avoid negative pressure on the head and cause discomfort.
- ▲ Please pay attention to clean this product before each use.
- ▲ Disinfect the suction nozzle and transparent collection cup after use to prevent cross-infection.
- ▲ Do not immerse the entire product in liquid.
- ▲ When the capacity of the collecting cup reaches half in use, it should be cleaned up in time before continuing to use it to prevent nasal dirt from being sucked into the motor and damage the product.

Product parameter

Product Name: Baby Nasal Aspirator

Product Model: KA1001

Working voltage: 3.7V

Charging voltage: DC 5V 1A

Maximum power: 1.5W

Battery capacity: 500mAH

Product net weight: 150g

Product size: L207×W41.5×H49mm

Trouble shooting

If the following problems occur, please follow the "Troubleshooting Guide". If you cannot solve them, please contact our after-sales service


Problem	Solution
No suction	1.Check whether the nozzle is installed in place 2.Check whether the collection cup is in place 3.Check if the vent is blocked 4.Check whether the sealing ring is intact
Device can't start	Please charge before use

Baby nasal aspirator


Quick guide

Component description

- Main body

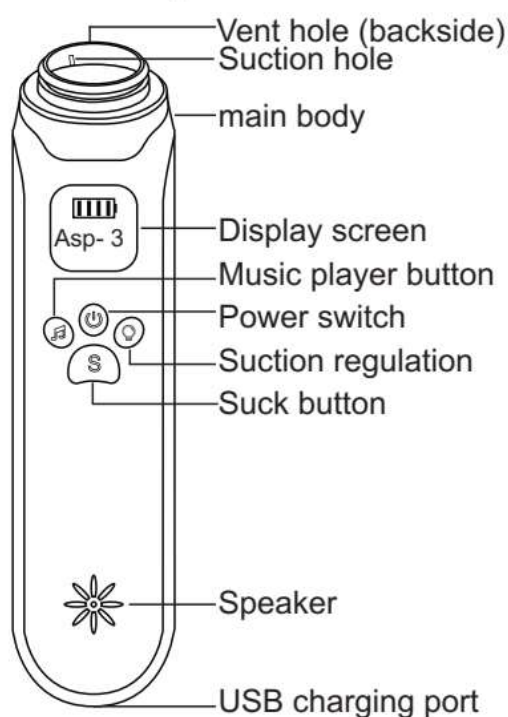


- Three replaceable nozzles

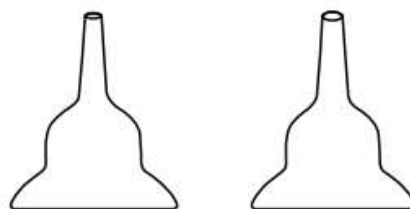

Round hole nozzle

Special for internal nasal cavity


There are two sizes, please use the appropriate nozzle according to the child's nostril size.

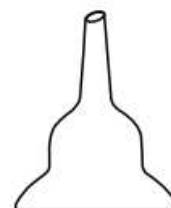

Oblique mouth nozzle

Used to clean snot or suck out thick secretions.

- Accessories

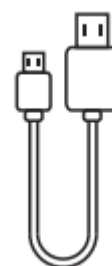

USB charging cable


Steps




14. Buckle the base of collection cup into the main body of the device, turn it clockwise to tighten, and then install the sealing cover on the base.




15. Snap the protective cover of the collection cup into the main body and turn it clockwise to tighten it.

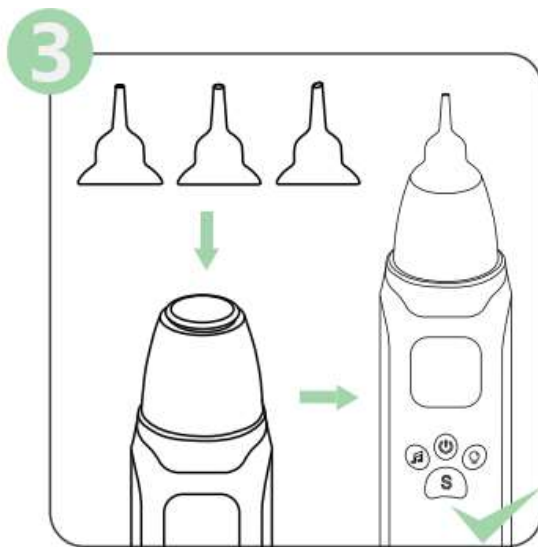

16. Select desired nozzle and install it on the collection cup.

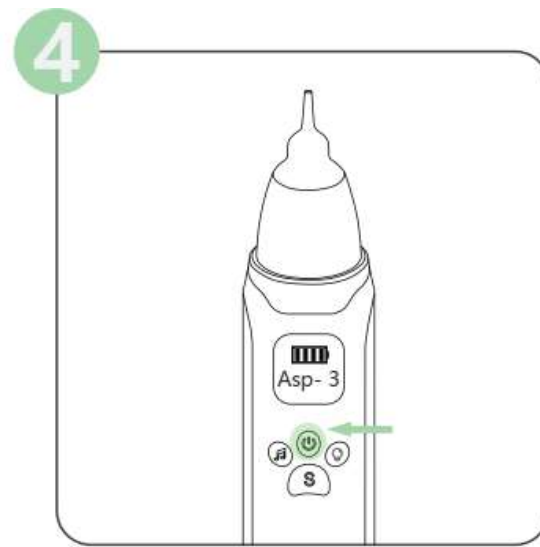

17. Press the power button to start the device.

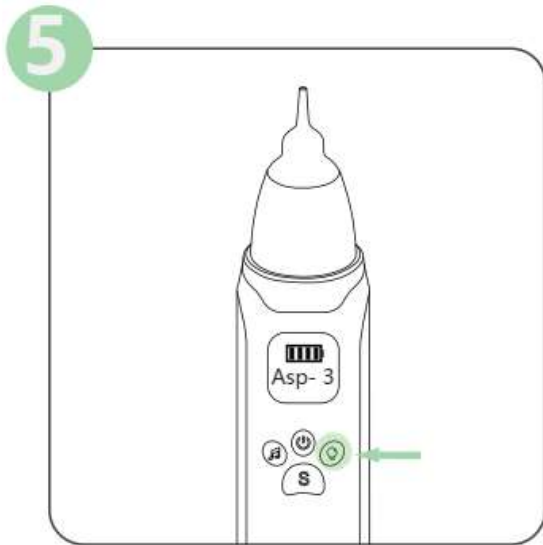

18. Adjust the gear to the desired intensity.



19. Press the music play button to play music. This function is optional. Beautiful music can attract a baby's attention and make the process of sniffing easier.




20. Press the suck button to turn on the inhale function.



21. Place the suction nozzle in the nasal cavity to clean the nasal cavity.

Use details

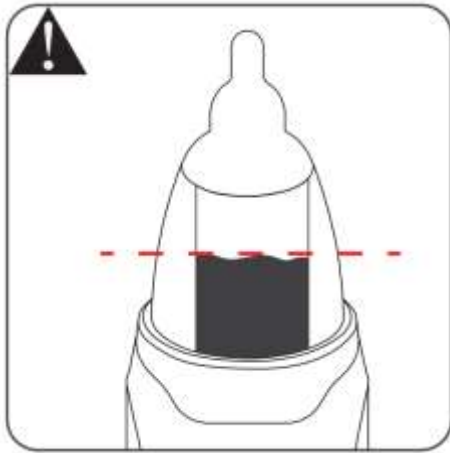

Note: When cleaning the nasal cavity, when the effusion in the collection cup exceeds half of the volume, please remove the collection cup in time and clean it before continuing to use it, otherwise it will easily lead to backflow, and it will be difficult to clean after the backflow.



Tip: Please use boiling water or steam to disinfect the suction nozzles and collection cup before use to avoid bacterial infection. Note that the microwave oven cannot be used for disinfection, available to put detachable parts in the dishwasher, water temperature cannot exceed 212°.



Note: The main body of the product is not waterproof. Do not rinse with water or clean at high temperature. Please use a soft damp towel to clean it.



Tip: After use, please clean the suction nozzle and collection cup with hot water in time to prevent bacteria from breeding.

Odsávačka detského spúta

Používateľská príručka

KA1001



Bezpečnostné pokyny

- Toto zariadenie je určené na čistenie nosovej dutiny a nosových derivátov dieťaťa.
- Vyhnite sa vniknutiu pevných a tvrdých predmetov s priemerom väčším ako 3 mm.
- Nehádzajte zariadenie, pretože by sa mohlo zničiť.
- Používajte iba príslušenstvo od toho istého výrobcu, inak môže dôjsť k zničeniu zariadenia.
- Táto položka nie je určená ako hračka. Dbajte na bezpečnosť a nedovoľte deťom, aby sa s nástrojom hrali.



Bezpečnostné pokyny pred použitím

- D- Pred použitím odporúčame sterilizovať odsávaciu hubicu a zbernú nádobku, napríklad ich na niekoľko minút namočiť do vriacej vody s teplotou 212 °F / 100 °C. Až potom ho pripojte k hlavnému telu zariadenia a používajte ho. Na dezinfekciu nepoužívajte zariadenia s vysokou teplotou, ako sú mikrovlnné rúry atď.
- Výrobok neponárajte úplne do vody
- Skontrolujte, či nie je poškodené tesnenie a či je kompletne príslušenstvo.
- Pred použitím si umyte ruky

Funkcie

- Tento výrobok je úplne nový produkt na čistenie nosa, ktorý je mäkký, účinný a ľahko sa čistí. Môže čistiť nosovú dutinu dojčiat a detí v bezpečných a pohodlných podmienkach.
- Tento výrobok má tri úrovne sacieho výkonu, ktoré možno nastaviť v závislosti od nosovej dutiny.
- Výrobok vydáva krásnu hudbu, ktorá umožňuje deťom čistiť si nosovú dutinu v uvoľnenej atmosfére.
- Nástavec na blister a prísavka vyrobené z potravinárskych materiálov sú bezpečné a hygienické, ľahko sa používajú a ľahko udržiavajú nosovú dutinu dieťaťa čistú.


Spôsob skladovania výrobku

- Na čistenie tohto výrobku používajte čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo saponát.
- Nasávaciu hubicu a zbernú nádobku možno dezinfikovať vriacou vodou alebo parou, ale nemožno ich dezinfikovať v mikrovlnnej rúre.
- Telo spotrebiča nie je vodotesné. Neumývajte ho vodou ani ho nečistite pri vysokých teplotách. Na čistenie používajte mäkkú, vlhkú handričku.
- Prístroj neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo vlhkom prostredí.
- Nepoužívajte korozívne čistiace chemikálie.

Štruktúra výrobku




- 3 vymeniteľné trysky

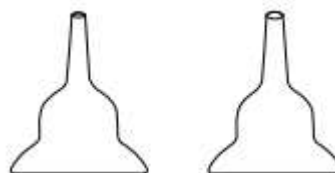

Tryska s okrúhlym otvorom

Špeciálne pre vnútornú nosovú dutinu

K dispozícii sú dve veľkosti, použite vhodnú trysku podľa veľkosti nosnej dierky vášho dieťaťa.

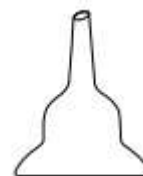

Šikmá ústna dýza

Používa sa na čistenie soplíkov alebo odsávanie hustých sekrétov.

- Návod na obsluhu

22. Zapnutie alebo vypnutie prístroja: Stlačením tlačidla ⑦ prístroj zapnete a opätovným stlačením ho vypnete;
23. Nastavenie intenzity odsávania: kliknutím na tlačidlo ⑧ ovládania odsávania nastavíte intenzitu, k dispozícii sú 3 úrovne intenzity;
24. Stlačením tlačidla ⑨ hudba, spustíte prehrávanie. Opätovným stlačením toho istého tlačidla ho vypnete;
25. Stlačením tlačidla odsávania ⑩ zapnete funkciu čistenia nosa. Opätovným stlačením tlačidlo vypnete;
26. Nabíjanie zariadenia..

Poznámka (čítajte pozorne)

- ▲ Uistite sa, že dieťa má pri používaní zariadenia otvorené ústa. Tým sa zabezpečí cirkulácia vzduchu v nosovej dutine a zabráni sa nepríjemným pocitom spôsobeným tlakom v hlave.
- ▲ Pri používaní zariadenia nezakrývajte druhú nosnú dierku dieťaťa. To môže spôsobiť nepríjemné pocity a bolesti hlavy.
- ▲ Pred každým použitím zariadenie umyte.
- ▲ Po použití vydezinfikujte odsávaciu hubicu a priehľadný zberný pohár, aby ste predišli infekcii.
- ▲ Neponárajte celé zariadenie do vody.
- ▲ Ak naplníte zbernú nádobu do polovice, mali by ste ju pred pokračovaním vyprázdniť a vyčistiť. Zabráni sa tak nasatiu nosných nečistôt do motora a poškodeniu výrobku.

Parametre produktu

Názov produktu: Odsávačka detských hlienov

Model výrobku: KA1001

Napätie: 3.7V

Nabíjacie napätie: DC 5V 1A

Maximálny výkon: 1.5W

Kapacita batérie: 500mAH

Hmotnosť výrobku: 150g

Rozmery výrobku: L207×W41.5×H49mm

Bežné problémy

Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich problémov, postupujte podľa týchto odporúčaní. Ak v tabuľke nenájdete problém, obráťte sa na naše oddelenie sťažností.


Problém	Riešenie
Zariadenie nevysáva	<ol style="list-style-type: none">5. Skontrolujte, či je dýza nainštalovaná na správnom mieste.6. Skontrolujte, či je zberná nádoba správne nainštalovaná.7. Skontrolujte, či nie je vetrací otvor zablokovaný.8. Skontrolujte, či tesniaci krúžok nie je poškodený.
Zariadenie sa nezapne	Pred použitím prístroj nabite.

Odsávačka detského spúta


Stručný sprievodca

Opis komponentov

- Telo nástroja

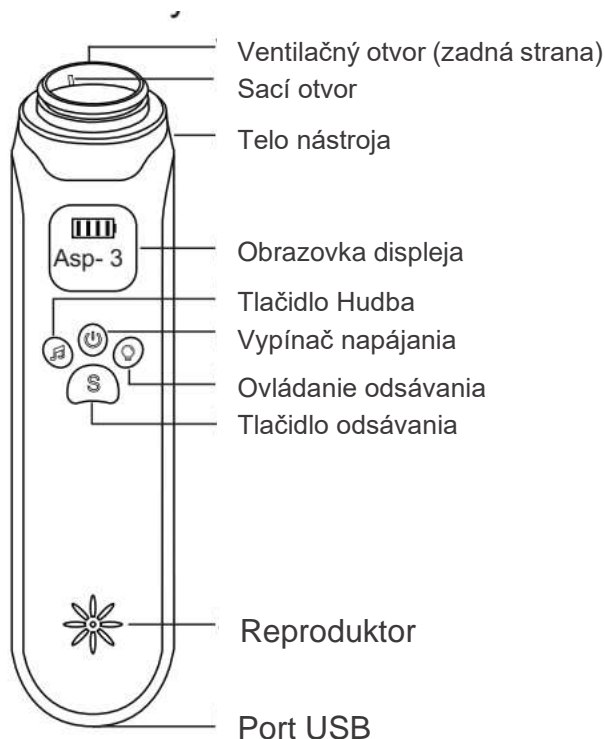


- Príslušenstvo

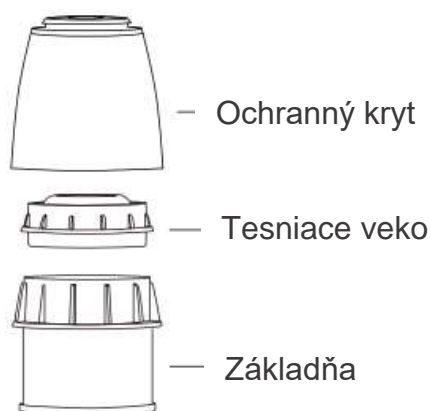


Zberný pohár

3 vymeniteľné trysky

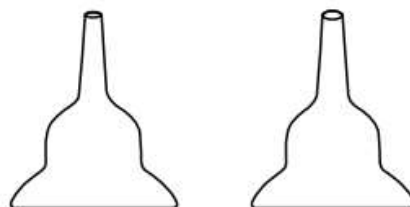

Dýza s okrúhlym otvorom

Špeciálne pre vnútornú nosovú dutinu
K dispozícii sú dve veľkosti, použite vhodnú trysku podľa veľkosti nosnej diery vášho dieťaťa.

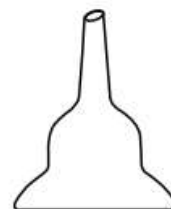

Šikmá ústna dýza

Používa sa na čistenie soplíkov alebo odsávanie hustých sekrétov.



Nabíjací kábel USB


Kroky




27. Vložte základňu do tela prístroja, otočte ňou v smere hodinových ručičiek a utiahnite. Potom na základňu nainštalujte tesniaci kryt.




28. Na telo zariadenia nasadte ochranný kryt a upevnite ho otáčaním v smere hodinových ručičiek.

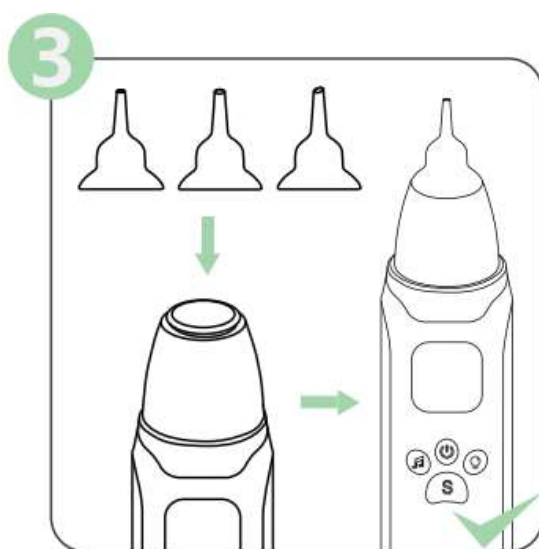

29. Vyberte si jednu z vymeniteľných trysiek a nainštalujte ju na zbernú nádobu.

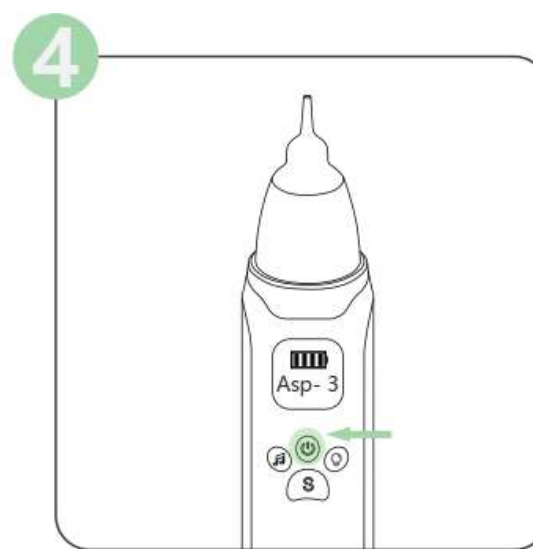

30. Stlačením tlačidla napájania zapnete zariadenie

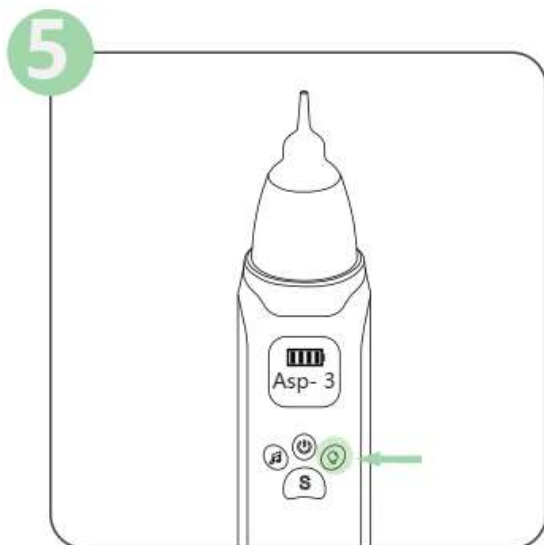

31. Vyberte si jednu z 3 úrovní intenzity.



32. Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie hudby. Tento krok môžete preskočiť. Hudba môže zamestnať myseľ dieťaťa a odsávanie môže byť jednoduchšie.




33. Stlačte tlačidlo odsávania.




34. Umiestnite trysku do nosovej dutiny a vyčistite ju pomocou zariadenia.

Podrobnosti o používaní

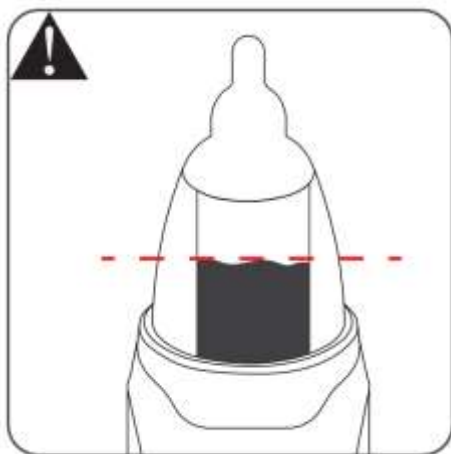

Poznámka: Ak sa zberná nádoba počas čistenia nosovej dutiny naplní do polovice, zastavte odsávanie a nádobu vyčistite. Po čistení pokračujte v odsávaní. Ak tak neurobíte, hrozí riziko spätného toku.

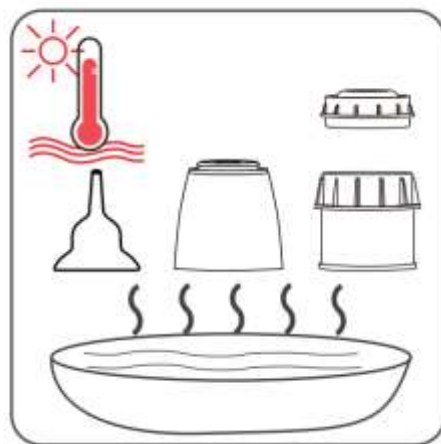

Tip: Na dezinfekciu vymeniteľných trysiek a zbernej nádoby použite vriacu vodu alebo paru. To môže zabrániť bakteriálnej infekcii. Na čistenie nepoužívajte mikrovlnnú rúru. Tieto časti však možno umývať v umývačke riadu, ale stupeň umývania nesmie prekročiť 212°.



Poznámka: Telo prístroja nie je vodotesné. Neoplachujte vodou ani nečistite pri vysokej teplote. Telo môžete čistiť vlhkou handričkou.



Tip: Po použití vyčistite vymeniteľné trysky a zbernú nádobu horúcou vodou, aby ste zabránili rastu baktérií.

Otroški nosni aspirator

Priročnik za otroški nosni aspirator

KA1001



Varnostna navodila

- Ta naprava je namenjena čiščenju nosne votline in nosnih derivatov otroka.

- Izogibajte se vdoru trdih in trdih predmetov s premerom več kot 3 mm.
- Naprave ne mečite, saj se lahko uniči.
- Uporabljajte samo dodatke istega proizvajalca, sicer se lahko naprava uniči.
- Ta izdelek ni namenjen kot igrača. Poskrbite za varnost in otrokom ne dovolite, da bi se igrali z instrumentom.



Varnostna navodila pred uporabo

- Priporočamo, da sesalno šobo in zbiralnik pred uporabo sterilizirate, na primer tako, da ju za nekaj minut namočite v vrelo vodo pri 212 °F / 100 °C. Šele nato ga pritrdite na glavni del naprave in ga uporabite. Za razkuževanje ne uporabljajte visokotemperaturnih naprav, kot so mikrovalovne pečice itd.
- Izdelka ne potopite v vodo v celoti.
- Preverite, ali je tesnilo nepoškodovano in ali je dodatna oprema popolna.
- Pred uporabo si umijte roke

Funkcije

- Ta izdelek je popolnoma nov izdelek za čiščenje nosu, ki je mehak, učinkovit in enostaven za čiščenje. V varnih in udobnih pogojih lahko očisti nosno votlino dojenčkov in otrok.
- Ta izdelek ima tri stopnje sesalne sile, ki jih lahko prilagodite glede na nosno votlino.
- Izdelek oddaja čudovito glasbo, ki otrokom omogoča čiščenje nosne votline v sproščenem vzdušju.
- Nastavek za mehurček in sesalec iz materialov, primernih za živila, sta varna in higienska, enostavna za uporabo in omogočata, da otrokova nosna votlina ostane čista.


Način skladiščenja proizvoda

- Za čiščenje tega izdelka uporabljajte čistila ali detergente na osnovi alkohola.
- Sesalno šobo in zbiralnik lahko razkužite z vrelo vodo ali paro, ne morete pa ju razkužiti v mikrovalovni pečici.
- Ohišje naprave ni vodotesno. Ne umivajte ga z vodo in ne čistite pri visokih temperaturah. Za čiščenje uporabite mehko in vlažno krpo.
- Enote ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem okolju.
- Izogibajte se uporabi jedkih kemikalij za čiščenje.


Struktura izdelka

Jet

Zbirna posoda

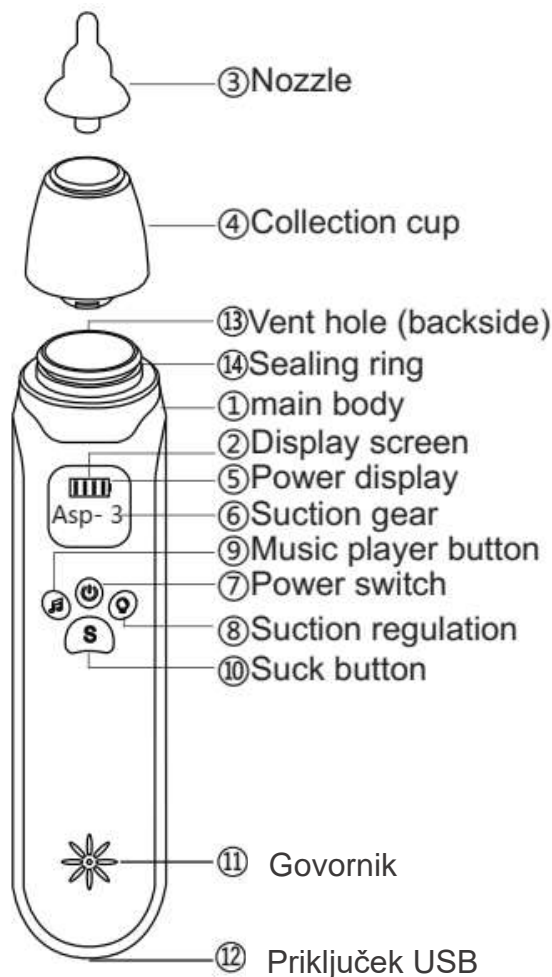


- 3 zamenljive šobe

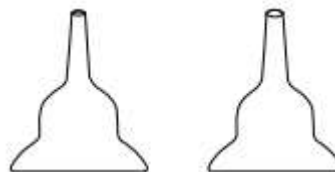

Šoba z okroglo odprtino

Posebno za notranjo nosno votlino
Na voljo sta dve velikosti, zato uporabite ustrezno šobo glede na velikost nosnic vašega otroka.

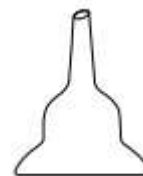

Poševna ustna šoba

Uporablja se za čiščenje smrka ali sesanje gostih izločkov.

- Navodila za uporabo

- Vklop ali izklop enote: pritisnite gumb ⑦, da vklopite enoto, in ga ponovno pritisnite, da jo izklopite;
- Za prilagoditev jakosti sesanja: kliknite gumb za nadzor sesanja ⑧, da prilagodite jakost, na voljo so 3 stopnje jakosti;
- Pritisnite gumb ⑨ music za začetek predvajanja. Za izklop ponovno pritisnite isti gumb;
- Pritisnite gumb za sesanje ⑩, da vklopite funkcijo čiščenja nosu. Ponovno pritisnite, da se izklopi;
- Polnjenje naprave: napravo polnite z enosmernim tokom 5 V 1A.

Opomba (pozorno preberite)

- ▲ Prepričajte se, da ima otrok med uporabo naprave odprta usta. To bo zagotovilo kroženje zraka v nosni votlini in preprečilo nelagodje zaradi pritiska v glavi.
- ▲ Pri uporabi naprave ne pokrivajte otrokove druge nosnice. To lahko povzroči nelagodje in glavobol.
- ▲ Pred vsako uporabo napravo operite.
- ▲ Po uporabi razkužite sesalno šobo in prozorno zbiralno posodo, da preprečite okužbo.
- ▲ Celotne naprave ne potaplajte v vodo.
- ▲ Če zbiralnik napolnite do polovice, ga morate pred nadaljevanjem izprazniti in očistiti. S tem preprečite, da bi se nosni delci vtaknili v motor in poškodovali izdelek.

Parametri izdelka

Ime izdelka: Otroški nosni aspirator

Model izdelka: KA1001

Napetost: 3.7V

Polnilna napetost: DC 5V 1A

Največja napetost: 1.5W

Zmogljivost baterije: 500mAH

Teža izdelka: 150g

Dimenzije izdelka: D207 × Š41,5 × V49 mm

Pogoste težave

Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, upoštevajte ta priporočila. Če težave ne najdete v tabeli, se obrnite na naš oddelek za pritožbe.


Problém	Rešitev
Naprava ne sesa	9. Preverite, ali je šoba nameščena na pravo mesto. 10. Preverite, ali je zbiralnik pravilno nameščen. 11. Preverite, ali ni zamašena prezračevalna odprtina. 12. Preverite, ali ni poškodovan tesnilni obroč.
Naprava se ne vklopi	Pred uporabo napravo napolnite.

Otroški nosni aspirátor


Kratek vodnik

Opis sestavnih delov

- ohišje instrumenta

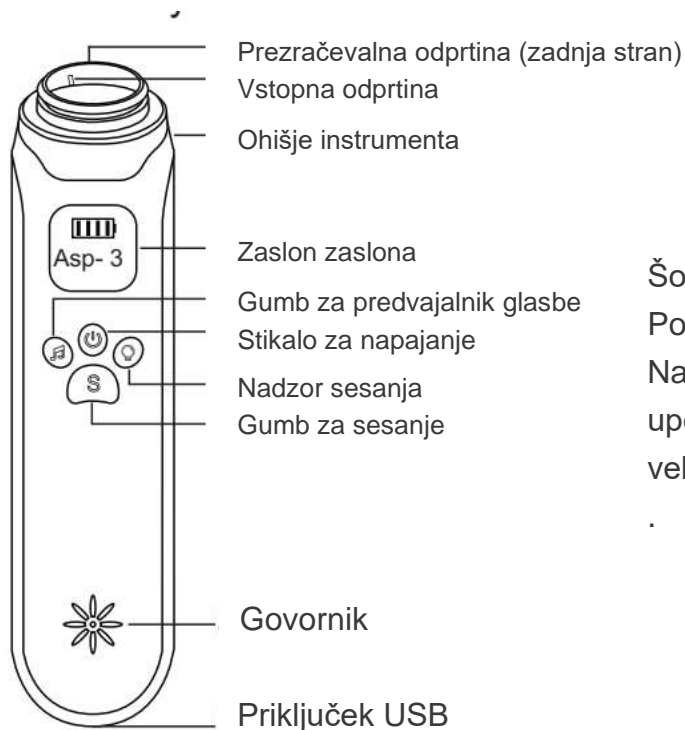


- 3 zamenljive šobe

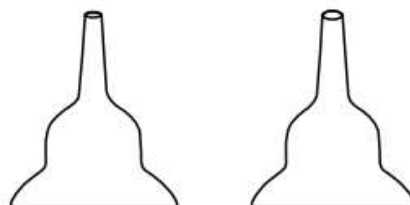

- Šoba z okroglo odprtino

Posebno za notranjo nosno votlino

Na voljo sta dve velikosti, zato uporabite ustrezno šobo glede na velikost nosnic vašega otroka.

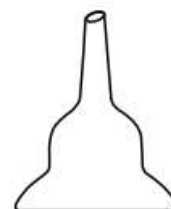

- Dodatki



Zbiralna skodelica

- Poševna ustna šoba

Uporablja se za čiščenje smrka ali sesanje gostih izločkov.



Polnilni kabel USB


Koraki




40. Podstavek vstavite v ohišje instrumenta, ga obrnite v smeri urinega kazalca in zategnite. Nato namestite tesnilni pokrov na podstavek.




41. Zaščitni pokrovček zataknete na ohišje naprave in ga pritrdite z vrtenjem v smeri urinega kazalca.

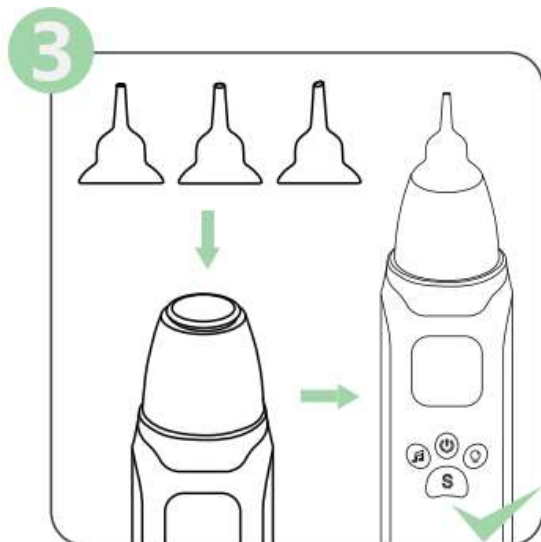

42. Izberite eno od zamenljivih šob in jo namestite na zbiralno posodo.

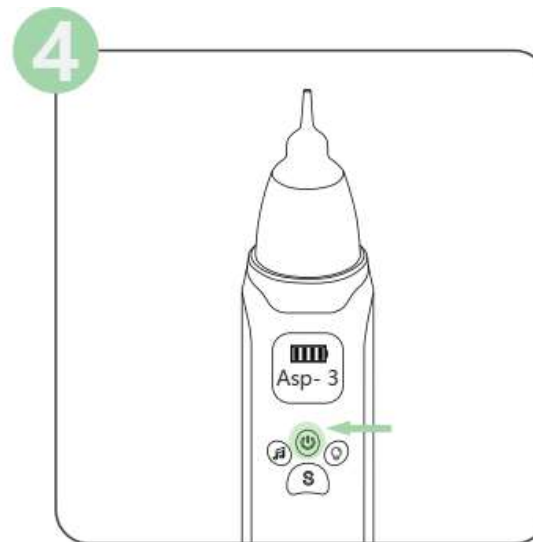

43. Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo.

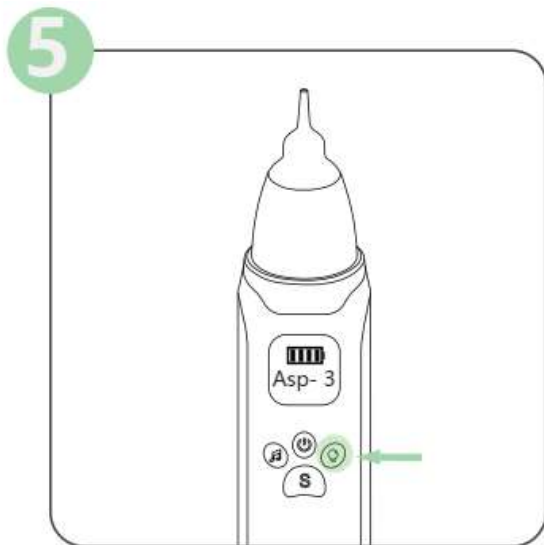

44. Izberite eno od 3 stopenj intenzivnosti.



45. Pritisnite gumb za predvajanje glasbe. Ta korak lahko preskočite. Glasba lahko zaposli otrokov um in sesanje je lažje.




46. Pritisnite gumb za sesanje.




47. Namestite šobo v nosno votlino in jo očistite z napravo.

Podrobnosti o uporabi

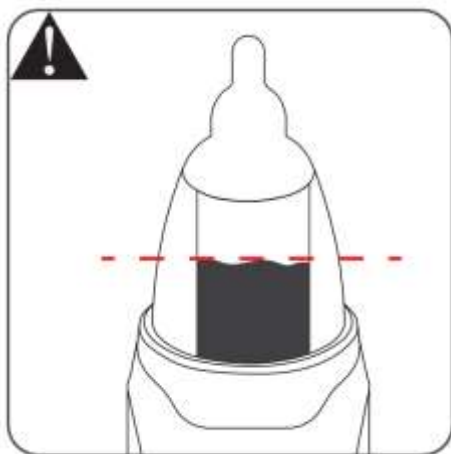

Opomba: Če se med čiščenjem nosne votline posoda za zbiranje napolni do polovice, prekinite sesanje in posodo očistite. Po čiščenju nadaljujte s sesanjem. Če tega ne storite, obstaja nevarnost povratnega toka.

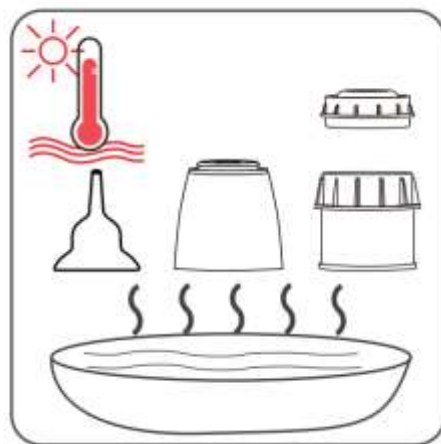

Nasvet: Za razkuževanje zamenljivih šob in zbiralnika uporabite vrelo vodo ali paro. To lahko prepreči bakterijsko okužbo. Za čiščenje ne uporabljajte mikrovalovne pečice. Te dele lahko očistite v pomivalnem stroju, vendar stopnja pomivanja ne sme presegati 212°.



Opomba: Ohišje instrumenta ni vodotesno. Ne spirajte z vodo in ne čistite pri visoki temperaturi. Ohišje lahko očistite z vlažno krpo.



Nasvet: Zamenljive šobe in zbiralnik po uporabi očistite z vročo vodo, da preprečite rast bakterij.

Baba orrszívó

Baba orrszívó kézikönyv

KA1001



Biztonsági utasítások

- Ezt az eszközt a gyermek orrüregének és orrszárnyainak tisztítására tervezték.

- Kerülje a 3 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd és kemény tárgyak behatolását.
- Ne dobja el a készüléket, ez tönkretelheti a készüléket.
- Csak azonos gyártótól származó tartozékokat használjon, különben a készülék tönkremehet.
- Ez a termék nem játéknak készült. Tartsa biztonságban, és ne hagyja, hogy gyermekei játszanak a hangszerrel



Biztonsági utasítások használat előtt

- Javasoljuk, hogy használat előtt sterilizálja a szívófejet és a gyűjtőcsészét, például néhány percig áztassa őket 212 °F / 100 °C-os forró vízben. Csak ezután csatlakoztassa a készülék főtestéhez, és használja. Ne használjon magas hőmérsékletű készülékeket, például mikrohullámú sütőt stb. fertőtlenítésre.
- Ne merítse a terméket teljesen vízbe
- Ellenőrizze, hogy a tömítés nem sérült-e meg, és hogy a tartozékok hiánytalanok-e.
- Használat előtt mosson kezet.


Funkciók

- Ez a termék egy vadonatúj orrtisztító termék, amely puha, hatékony és könnyen tisztítható. Biztonságos és kényelmes körülmények között tisztíthatja a csecsemők és gyermekek orrüregét.
- Ez a termék háromféle szívóerővel rendelkezik, amely az orrüregtől függően állítható.
- A termék gyönyörű zenét bocsát ki, amely lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy nyugodt légkörben tisztítsák meg orrüregüket.
- Az élelmiszer-minőségű anyagokból készült hólyagos rögzítés és a tapadókorong biztonságos és higiénikus, könnyen használható és könnyen tisztán tartható a baba orrürege.


A termék tárolásának módja

- A termék tisztításához alkohol alapú tisztítószeret vagy mosószert használjon.
- A szívófej és a gyűjtőcsésze fertőtleníthető forró vízzel vagy gőzzel, de mikrohullámú sütőben nem fertőtleníthető.
- A készülék teste nem vízálló. Ne mossa vízzel, és ne tisztítsa magas hőmérsékleten. A tisztításhoz használjon puha, nedves ruhát.
- Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy párás környezetben.
- Kerülje a maró hatású tisztítószer használátát.

A termék szerkezete

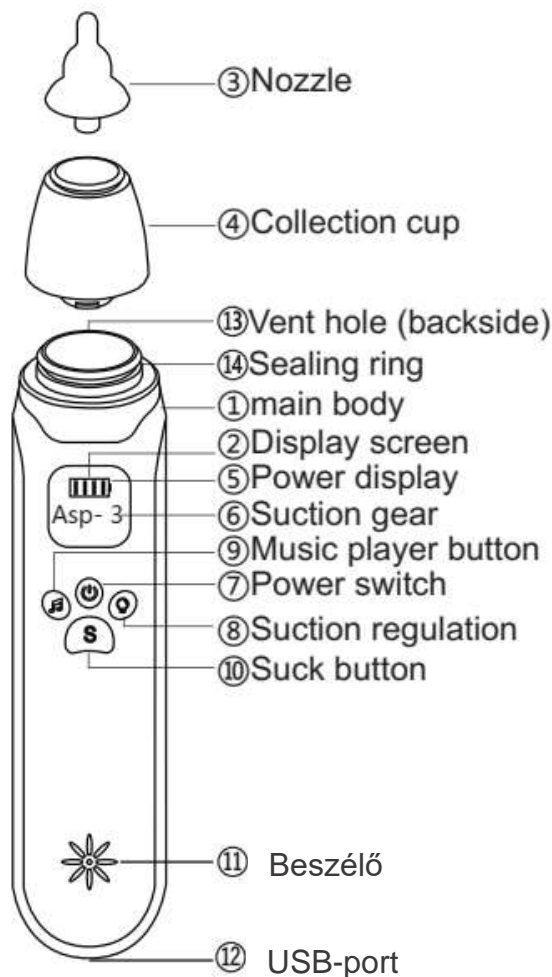


- 3 cserélhető fúvóka

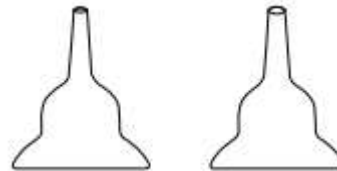

Fúvóka kerek furattal

Speciális a belső orrüreg számára
Két méret van, kérjük, használja a megfelelő fúvókát gyermeke orrlyukméretének megfelelően.

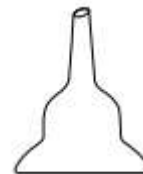

Ferde orális fúvóka

Takony tisztítására vagy sűrű váladék felszívására szolgál.

- Használati utasítás

48. A készülék be- vagy kikapcsolása: nyomja meg a ⑦ gombot a készülék kikapcsolásához, és nyomja meg újra a kikapcsoláshoz;
49. A szívás erősségének beállításához: kattintson a ⑧ szívásvezérlő gombra az intenzitás beállításához, 3 intenzitási szint áll rendelkezésre;
50. Nyomja meg a ⑨ zene gombot a lejátszás elindításához. Nyomja meg ugyanazt a gombot újra a kikapcsoláshoz;
51. Nyomja meg a ⑩ szívógombot az orrtisztító funkció bekapcsolásához. Nyomja meg újra a kikapcsoláshoz;
52. A készülék töltése: a készülék töltéséhez használjon 5 V 1A egyenáramot..

Megjegyzés (figyelmesen olvassa el)

- ▲ Győződjön meg arról, hogy a gyermek szája nyitva van, amikor a készüléket használja. Ez biztosítja a levegő keringését az orrüregben, és megakadályozza a fejben lévő nyomás okozta kellemetlenségeket.
- ▲ A készülék használatakor ne takarja el a gyermek másik orrlyukát. Ez kellemetlen érzést és fejfájást okozhat.
- ▲ Győződjön meg róla, hogy a készüléket minden használat előtt kimosta.
- ▲ A fertőzés megelőzése érdekében fertőtlenítse a szívófejet és az átlátszó gyűjtőcsészét használat után.
- ▲ Ne merítse az egész készüléket vízbe.
- ▲ Ha a gyűjtőpoharat félig megtöltötte, a folytatás előtt ki kell ürítenie és meg kell tisztítania. Ez megakadályozza, hogy az orrtörmelék beszívódjon a motorba és károsítsa a terméket.

Termék paraméterek

Termék neve: Baba orrszívó

Termékmodell: KA1001

Feszültség: 3.7V

Töltési feszültség: DC 5V 1A

Maximális teljesítmény: 1.5W

Akkumulátor kapacitás: 500mAH

Termék súlya: 150g

A termék méretei: L207×W41.5×H49mm

Gyakori problémák

Ha az alábbi problémák bármelyikét tapasztalja, kérjük, kövesse az alábbi ajánlásokat. Ha nem találja a problémát a táblázatban, kérjük, forduljon panaszosztályunkhoz.


A probléma	Megoldás
A készülék nem szívja	13. Ellenőrizze, hogy a fúvóka a megfelelő helyre van-e szerelve. 14. Ellenőrizze, hogy a gyűjtőedény helyesen van-e felszerelve. 15. Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílás nincs-e elzárva. 16. Ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű nem sérült-e meg.
A készülék nem kapcsol be	Használat előtt töltsse fel a készüléket.

Baba orrszívó

Gyors útmutató

Az összetevők leírása

- **Műszertest**

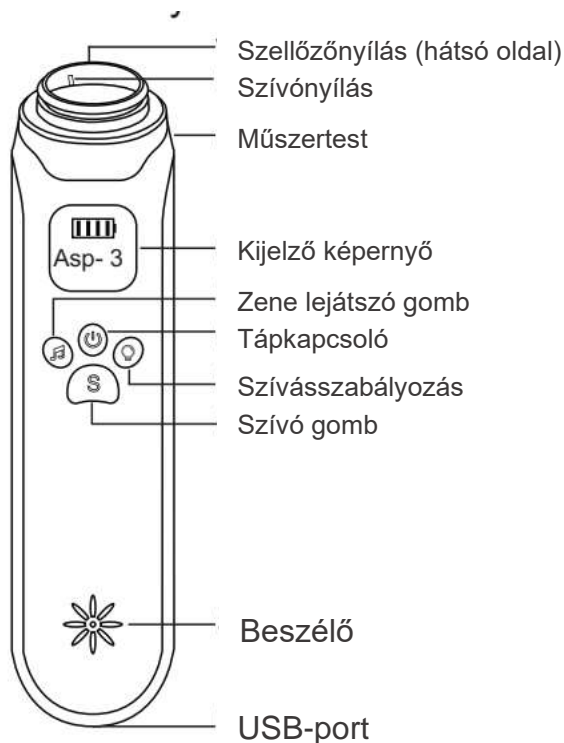


- **Tartozékok**



Gyűjtőedény


3 cserélhető fúvóka

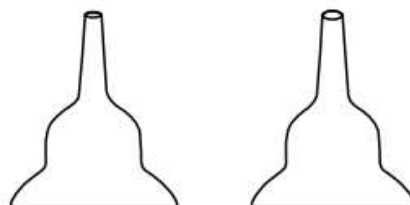

Fúvóka kerek furattal


Speciális a belső orrüreg számára

Két méret van, kérjük, használja a megfelelő fúvókát gyermeke orrlyukméretének megfelelően.

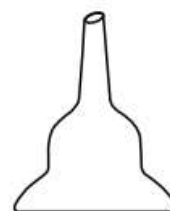

Ferde orális fúvóka

Takony tisztítására vagy sűrű váladék felszívására szolgál.

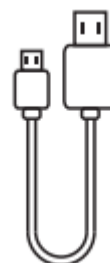

USB töltőkábel


Lépések




53. Helyezze be az alapot a műszertestbe, fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, és húzza meg. Ezután szerelje fel a tömítőfedelelet az alapra.




54. Pattintsa fel a védősapkát a készülék testére, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse azt.

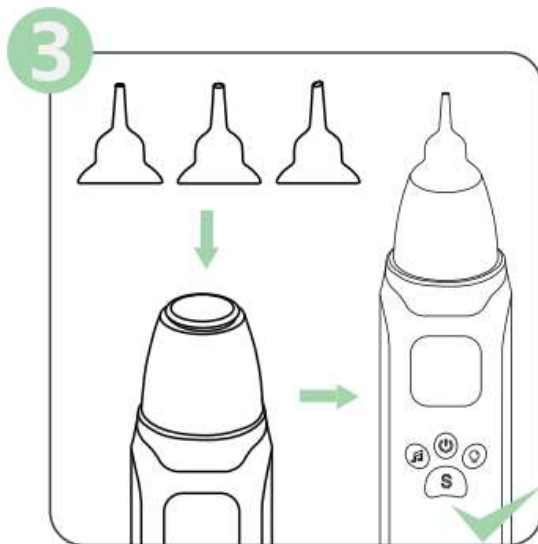

55. Válassza ki a cserélhető fúvókák egyikét, és szerelje fel a gyűjtőtartályra.

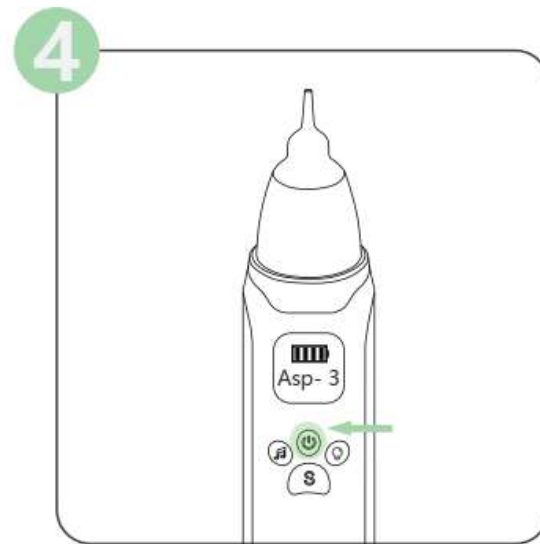


56. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.

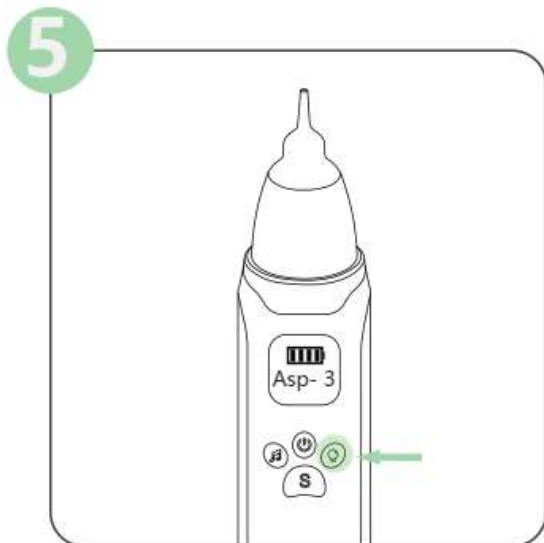

57. Válasszon egyet a 3 intenzitási szint közül.



58. Nyomja meg a gombot a zene lejátszásához. Ez a lépés kihagyható. A zene lefoglalhatja a baba elméjét, és a szívás könnyebb lehet.

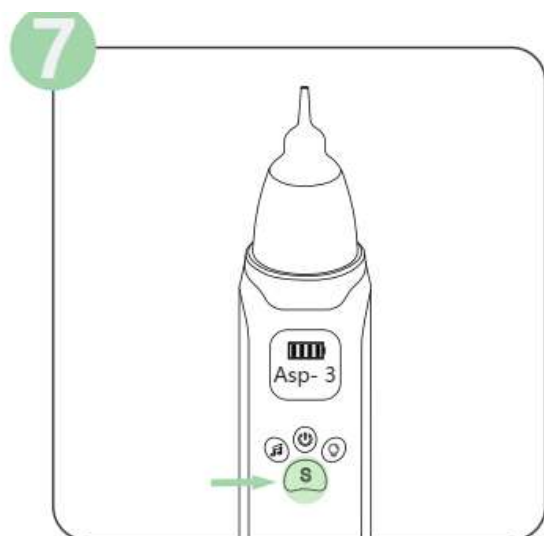


59. Nyomja meg a szívógombot.



60. Helyezze a fúvókát az orrüregbe, és tisztítsa meg a készülékkel.

A használat részletei

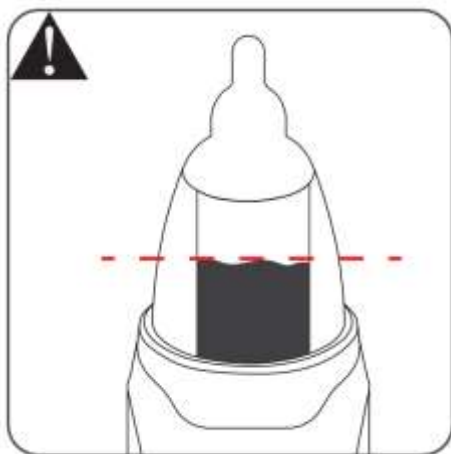

Megjegyzés: Ha a gyűjtőtartály félig megtelik az orrtisztítás során, állítsa le a szívást, és tisztítsa meg a tartályt. A tisztítás után folytassa a szívást. Ha nem így tesz, fennáll a visszaáramlás veszélye.



Ez megakadályozhatja a bakteriális fertőzést. Ne használjon mikrohullámú sütőt a tisztításhoz. Ezek az alkatrészek azonban mosogatógépben is tisztíthatók, de a mosási fok nem haladhatja meg a 212°-ot.



Megjegyzés: A készülék teste nem vízálló. Ne öblítse ki vízzel, és ne tisztítsa magas hőmérsékleten. A test tisztításához használjon nedves ruhát.



Tipp: A cserélhető fúvókákat és a gyűjtőcsészét használat után forró vízzel tisztítsa meg a baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében.