

# Intrafix® SafeSet

Nová generace infúzních setů



Zvyšuje bezpečnost a efektivitu práce na každém oddělení

# Intrafix® SafeSet

## Intrafix® SafeSet – první infúzní set s bezpečnostními prvky

Díky AirStop už není pohled na vyprazdňující se kontejner důvodem pro zbytečný spěch či znepokojení pacienta.

Díky PrimeStop můžete připravovat několik infúzí současně hygieničtěji a rychleji než doposud.

Srovnávací studie<sup>1)</sup> se standardními infúzními sety prokázala, že používání setů Intrafix® SafeSet redukuje čas potřebný k přípravě infúze, zvyšuje efektivitu práce a snižuje náklady.

1) Frei A., Profitability analysis of Intrafix® SafeSet when used in peripheral venous gravity infusion (2003, submitted for publication).

Průhledný, pevný ISO trn

Vysoce transparentní kapková komůrka

Jedinečný centrálně umístěný kroužek

Elastická část kapkové komůrky

Velká plocha filtru


Průhledná hadička setu v délce 180 cm

Šroubovací konektor s uzávěrem

Vyřešte „Spaghetti syndrome“

Optimální délka setu společně s možností zafixovat konec setu na rolovací uzávěr vás zbaví potíží se zamotanou infúzní linkou.

Velký rolovací uzávěr

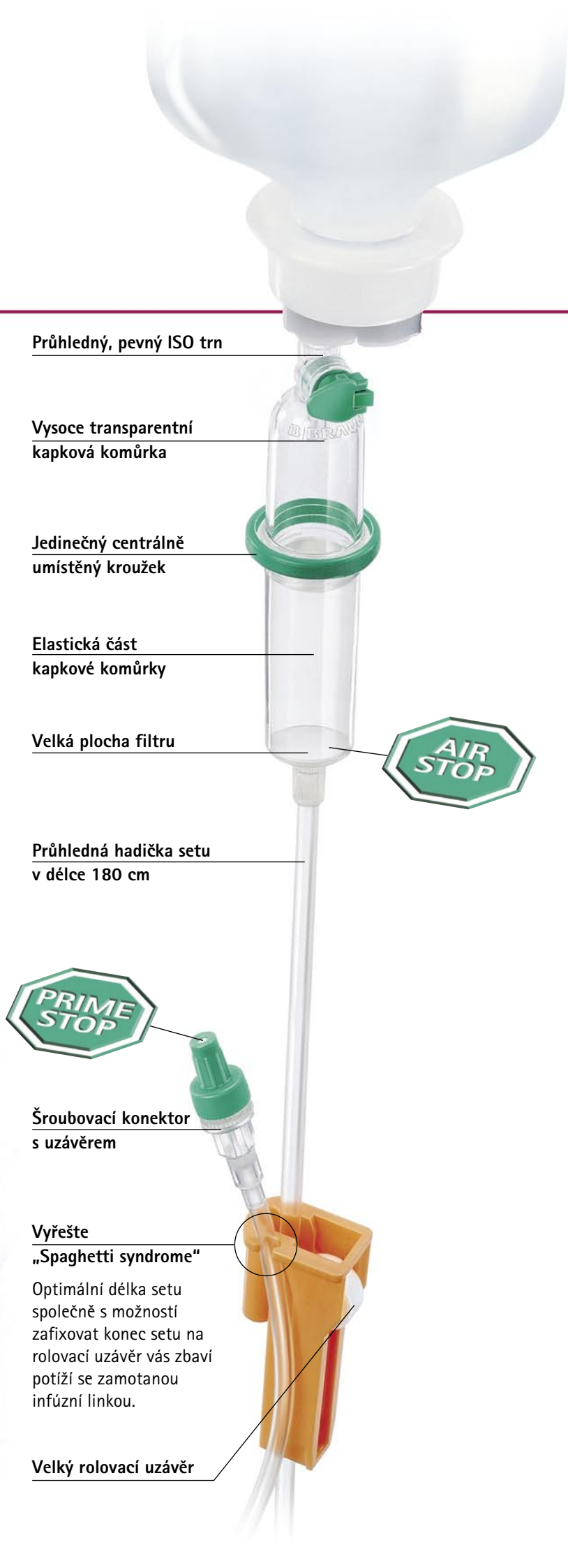

# Chraňte vaše pacienty i sebe

Divize Hospital Care

## Výhody pro uživatele

- Prevence infúze vzduchu a souvisejících infekcí
- Méně stresu na vašich odděleních
- Úspora času a nákladů

### PrimeStop

Zajišťuje automatické naplnění infúzního setu.

Zabraňuje odkapávání roztoku z konce setu na vaše ruce, podlahu či lůžko pacienta.

Umožňuje připravit několik infúzí najednou.

Udržuje infúzní systém uzavřený až do napojení k pacientovi.



Nová krytka koncového konektoru vybavená hydrofobní membránou zabraňuje odkapávání infúzního roztoku z konce setu a vylučuje kontaminaci.

### AirStop

Prevence infúze vzduchu a souvisejících infekcí.

Při vyprázdňení kontejneru zajišťuje AirStop konstantní hladinu infúzního roztoku. Vzduch nevniká do hadičky infúzního setu.




Unikátní vzduchotěsná membrána slouží jako ochranná bariéra proti infúzi vzduchu a zároveň jako filtr partikulárních částic.

# Intrafix® SafeSet



## Discifix® – trojcestný kohout

Bezpečný přístup pro snadnou injekci, aspiraci nebo paralelní infúzi

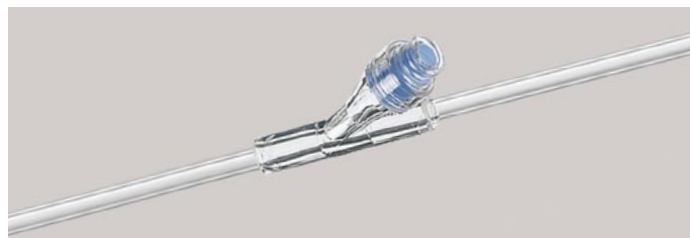

## Bezjehlový vstup (chlopeč)

Praktický, bezpečný a rychle dostupný bezjehlový vstup pro injekci, aspiraci nebo paralelní infúzi – uzavřený systém

Intrafix®	Popis produktu	Délka hadičky	Katalogové číslo
SafeSet	základní	180 cm	4063000
	N.T.P. – Neutrapur (non-PVC)		4063002
	Y-N.F. – s bezjehlovým vstupem	210 cm	4063004
	3-W.S.C. – s trojcestným kohoutem a prodlužovací hadičkou	220 cm	4063006

Prodejní jednotka: 100 ks



**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

**B. Braun Medical s.r.o.**  
Divize Hospital Care

V Parku 2335/20  
CZ-148 00 Praha 4  
Tel. +420-271 091 111  
Fax +420-271 091 112  
e-mail: [info@bbraun.cz](mailto:info@bbraun.cz)  
[www.bbraun.cz](http://www.bbraun.cz)