

Infuzní sety s novým regulátorem průtoku

Pro bezpečnější infuzní terapii



Výhody pro uživatele

- Snadná a bezpečná manipulace
- Stabilní rychlost infuze
- Přesnější a flexibilnější nastavení průtoku
- Ochrana proti nechtěné změně rychlosti infuze
- Úspora času ošetrovatelského personálu

Nový standard v regulaci infuze pro větší efektivitu a uživatelský komfort



celosvětově
testováno

Nový standard v regulaci infuze pro větší efektivitu a uživatelský komfort

- Zásadní rozdíl v regulaci infuze, minimalizace kolísání průtoku, které může způsobit předávkování
- Požadovaná stabilita průtoku díky speciálnímu regulačnímu kanálku
- Širší rozsah regulace průtoku
- Ergonomický tvar regulátoru průtoku
- Jemná manipulace bez větší námahy




Praktický kryt pro bezpečné zasunutí použitého trnu




Závěs pro hadičku infuzního setu

Infuze nyní lépe pod kontrolou – Safety Concept B. Braun

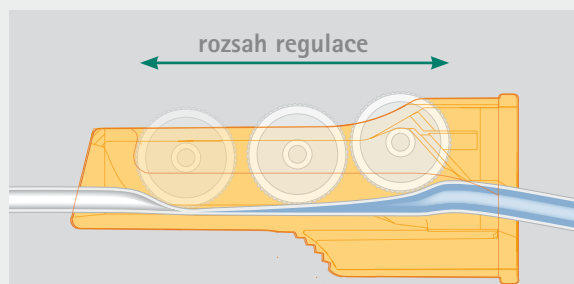

Nový, variabilnější rozsah regulace průtoku pro snazší a rychlejší nastavení rychlosti infuze, a to i při požadavku na minimální průtok. Konstrukce regulátoru splňuje nejnáročnější požadavky na přesnost nastavení rychlosti infuze.

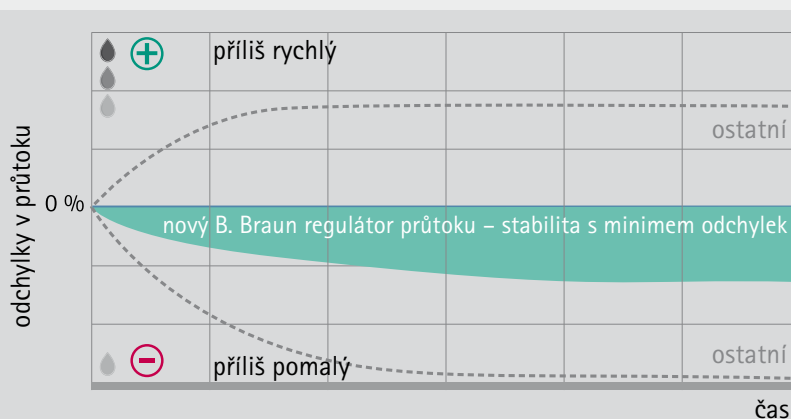

Nový B. Braun regulátor je díky stabilitě průtoku velmi vhodný pro použití v anestezii i ve všech ostatních oborech medicíny

Identifikace výrobků B. Braun na první pohled

Nový koncept označování výrobků B. Braun

Výhody pro uživatele

- Jasná a snadná vizuální identifikace jednotlivých typů výrobků
- Jednoduché rozbalení
- Praktické informace pro uživatele přímo na obalu
- Moderní označení všech infuzních setů dle jednotného klíče



Identifikace požadovaného výrobku na první pohled

Velké množství různých výrobků, které jsou skladovány na jednotlivých odděleních nemocnic, může způsobit potíže s rozlišením a výběrem správného produktu, obzvláště v časové tísni. Může dojít k neúmyslné záměně výrobků.

Abychom vyřešili tento problém a zjednodušili použití infuzních souprav B. Braun, vyvinuli jsme nový koncept označení, který umožní rozpoznání požadovaného výrobku na první pohled. Tento koncept napomáhá ošetřujícímu personálu vybrat správný produkt rychle a intuitivně.

Základní principy rychlé identifikace nových infuzních setů B. Braun

Řazení informací dle hierarchie umožňuje uživateli rychlejší a snadnější nalezení požadovaného produktu.

1. Oboustranně vertikálně tištěné štítky

2. Základní informace o výrobku

3. Výrobní data

- A Expirace
- B Datum výroby
- C Číslo šarže
- D Katalogové číslo
- E Centrální evidenční číslo
- F Způsob sterilizace

4. Nepoužívat opakovaně, výstraha – pro porozumění čti návod k použití

5. Tlaková odolnost

6. B. Braun logo, indikátor pro otevření

7. Obchodní název výrobku

8. Barevné odlišení jednotlivých typů výrobků

9. Další charakteristika výrobku, např. délka hadičky

10. Objem bolusu na 1m hadičky pod tlakem

11. DEHP free

12. Návod k použití

13. Symbol recyklovatelnosti syntetického odpadu (pouze v SRN)

14. Apyrogenní


15. Rozlišení variant produktů obsahujících zpětný ventil prvkem bílých trojúhelníků v barevném pruhu

16. Rozlišení variant produktů obsahujících zpětný ventil prvkem bílých trojúhelníků v barevném pruhu



PrimeStop

Nová krytka koncového konektoru vybavená hydrofobní membránou zabraňuje odkapávání infuzního roztoku z konce setu a vylučuje kontaminaci.

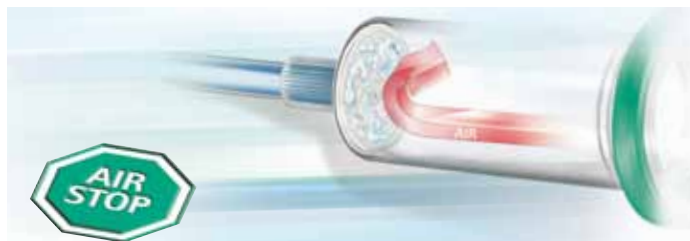

AirStop

Při vyprázdnění kontejneru zajišťuje AirStop konstantní hladinu infuzního roztoku. Vzduch nevniká do hadičky infuzního setu. Unikátní vzduchotěsná membrána slouží jako ochranná bariéra proti infuzi vzduchu a zároveň jako filtr partikulárních částic.




Discofix® – trojcestný kohout

Bezpečný přístup pro snadnou injekci, aspiraci nebo paralelní infuzi.




Bezjehlový vstup (chlopeč)

Praktický, bezpečný a rychle dostupný bezjehlový vstup pro injekci, aspiraci nebo paralelní infuzi – uzavřený systém.

SafeSet	Popis produktu	Délka hadičky	Katalog. číslo
	Základní	180 cm	4063000
	N.T.P. – Neutrapur (non-PVC)		4063002
	Y-N.F. – s bezjehlovým vstupem	210 cm	4063004
	3-W.S.C. – s trojcestným kohoutem Dixcofix® a prodlužovací hadičkou	220 cm	4063006

Prodejní jednotka: 100 ks

Intrafix Primeline	Popis produktu	Délka hadičky	Katalog. číslo
	Classic	150 cm	4062957
	Comfort	180 cm	4062981L

Prodejní jednotka: 100 ks