

# ZÁRUČNÝ LIST

## Vozík invalidný mechanický ALUMINIUM

Model: VCWK9AL	Zákazník:
č.s.	
Výrobné číslo:	
Doplňky:	Telefón:
	Záručná poisťovňa:

**Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov.**

Záruka sa vzťahuje na skryté vady materiálu a výrobné chyby. Nevzťahuje sa na diely, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu (plášte a pod), na škody, ktoré vznikli dôsledkom nadmerného namáhania (preťažovaním vozíka, prekonávaním schodov bez plošiny, rampy alebo nájazdu), násilného poškodenia ne kvalifikovaným zásahom, nespriajnej údržby, alebo neautorizovanými zmenami konštrukcie. Vozík sa nesmie používať ako nosič do dopravných prostriedkov.

Zmeny v rámci modulového systému môže vykonať iba výrobca alebo výhradný dovozca, pričom musia byť použité originálne a schválené náhradné diely. Výrobca si vyhradzuje možnosť vykonanie zmien z dôvodu technického zlepšenia/modifikácie dizajnu.

### UPOZORNENIE:

Pri nárokovanií na bezplatnú záručnú opravu sa obráťte vždy na Vašho autorizovaného predajcu – dodávateľa, u ktorého ste pomocku získali s týmto vyplneným a potvrdeným záručným listom. V opačnom prípade strácaτε nárok na bezplatnú opravu.

Záručný a pozáručný servis:

REVO – MAT, s.r.o.

M. R. Štefánika 4

916 01 Stará Turá

Tel/Fax: 032 776 2949

Mob.: 0917 871 888, 0915 573 950

e-mail: [revomat.servis@gmail.com](mailto:revomat.servis@gmail.com)

[revomat.zdravpom@gmail.com](mailto:revomat.zdravpom@gmail.com)

Vydal: .....

Dňa: .....

.....  
Pečiatka a podpis

Vozík invalidný mechanický ALUMINIUM

Výrobca:

mdh Sp. z o. o.

ul. Ks. W. Tyimiensklego 22/24

90-349 Łódź, Poľsko


Dovozca pre Slovensko:

REVO-MAT, s.r.o.

M. R. Štefánika 4

916 01 Stará Turá

CE

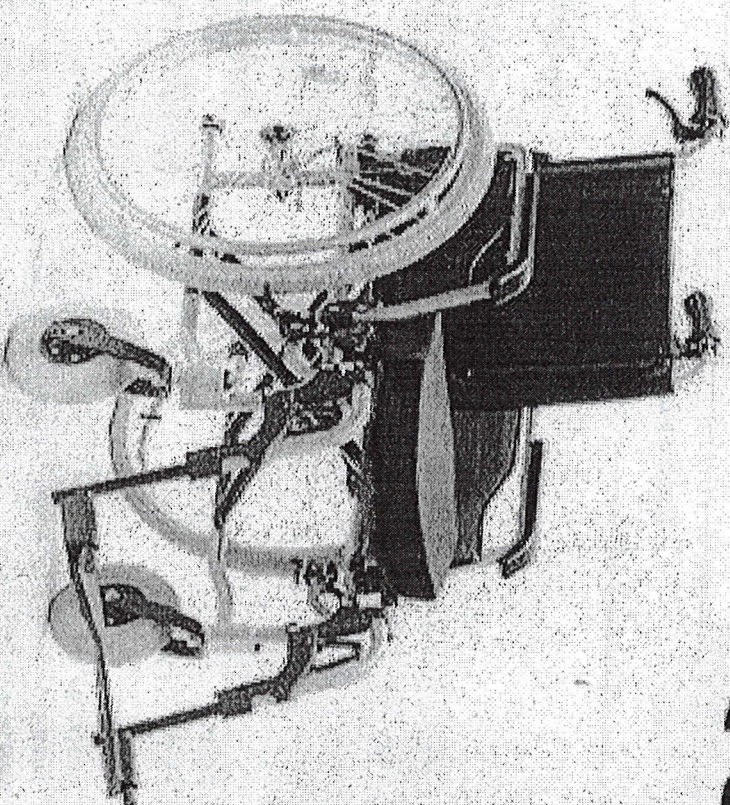



### Návod na použitie

Vozík slúži na prepravu sedaciach chorých a telesne postihnutých osôb vo vnútorných priestoroch budov alebo po vonkajších komunikáciách so spevneným povrchom. Pohyb vozíka je vykonávaný buď vlastnou silou užívateľa pomocou hnacích obrúč veľkých (zadných) kolies alebo tlačením vozíka sprevádzajúcou osobou pomocou rúkovie, umiestnených v hornej časti opierky chrbta. Pri prekonávaní prekážky (obrubník chodníka), sprevádzajúca osoba zatlačí nohou na nášlapnú gumu umiestnenú v spodnej zadnej časti rámu vozíka a zároveň zatlačí rukami rúčky pre doprovod smerom nadol, čím sa predná časť vozíka nadvíhne a súčasným potlačením vozíka vpred prekážku prekonáme. Vozík je možné zložiť uchopením poťahu sedačky a jeho pritiahnutím smerom nahor. Opätovné rozloženie vozíka prevedieme uchopením ľavej alebo pravej hnacej obrúče veľkého (zadného) kolesa a jej potiahnutím smerom do strany. Jednou rukou súčasne pridržiavame protiahly bočný rám pomocou rúkovie pre doprovod.

**Upozornenie: pri nasadaní a vysadaní z vozíka musí byť vozík zabrzdený! Pri jazde do svahu alebo zo svahu, ktorého sklon je väčší ako 20 %, je sprievod sprevádzajúcej osoby vždy nutný!**

### Popis výrobku

Rám vozíka je vyrobený z hliníkových zliatin, ktorého konštrukcia umožňuje skladanie a rozkladanie vozíka. Jeho povrch je upravený špeciálnou farbou. Nosný kríž pre zvýšenú nosnosť je zdvojený. Pri šírke sedadla 50 cm výrobca montuje prídavné brzdenie (bubnové brzdy) pre sprevádzajúcu osobu. Bočnice vozíka sú odklopné a odnímateľné. Opierka chrbta a poťah sedadla sú vyrobené zo špeciálnej nylonovej tkaniny, dobre znášajúcej záťaž. Výškovo nastaviteľné stúpačky po uvoľnení aretačného mechanizmu je možné odklopiť a odobrať. Plastové dosky stúpačiek sú odklopné. Súčasťou vozíka je mäkká molitanová prídavná sedačka.

**Upozornenie: plastová doska opierky nohy slúži výhradne na opieranie chodidla nohy pri sedení a nie ako pomôcka pri nasadaní na vozík alebo zosadaní z vozíka. Hrozí poškodenie plastovej dosky stúpačky a následné prevrátenie vozíka s možným úrazom!**

Predné kolesá 200x50 PU sú uchytené na hliníkových vidliciach, zadné 24" fúkanie sú vybavené mechanickou brzdou a rýchlovlupinacími oskami.

### Základné rozmery invalidného vozíka ALUMINIUM

Celková výška :	92 cm
Celková šírka :	šírka sedadla + 15 cm
Celková dĺžka :	80 cm
Šírka sedu :	40, 45, 50 cm
Hĺbka sedu :	40 cm
Šírka zloženého vozíka :	28 cm
Hmotnosť:	16 kg
Nosnosť vozíka :	140 kg

### Údržba vozíka

Na čisteniu rámu vozíka a poťahov je možné použiť bežné saponátové prípravky. Nie je povolené používať benzín alebo iné organické rozpúšťadlá. Púzdra brzd je možné premasťiť kvapkou oleja na bicykle.

**Dátum poslednej revízie textu: 10.10.2013**

Záručné a pozáručné opravy		
Popis reklamácie	Dátum	Peciatka a podpis