

SureScreen FOB

imunologický test na stanovenie skrytého krvácania v stolici

Vyšetrenie stolice imunologickým testom SureScreen FOB pomôže odhaliť vďaka svojej vysokej citlivosti aj mikroskopické krvácanie v stolici a tým upozorniť aj na začínajúce nádorové ochorenie, ktoré je dobre liečiteľné, ak sa diagnostikuje v skorom štádiu.

UPOZORNENIA

Skúmavku skladujte pri teplote 2-30°C mimo dosah detí!

Neodoberajte vzorky pri krvácaní spôsobenom hemoroidmi alebo menštruáciou.

Pred vyšetrením nie sú potrebné žiadne diétne obmedzenia. Alkohol a niektoré lieky užívané v nadbytočnom množstve môžu spôsobiť gastrointestinálne krvácanie. Tieto lieky by mal lekár pacientovi vysadiť najmenej 48 hodín pred testovaním.


ODBER VZORKY

1. Stolicu dajte na suchú čistú podložku, alebo na suchý čistý papier. Stolica z toalety nie je vhodná na odber.


2. Zelený uzáver na nádobke, ktorú ste dostali od svojho lekára, chyťte za spodnú širšiu časť a odskrutkujte ho. Dajte pozor, aby ste pri tom zároveň neodskrutkovali hornú oblú časť uzáveru. Ak ju omylom odskrutkujete, zaskrutkujte ju späť. Nádobku držte tak, aby ste nevyliali tekutinu.

3. Z vnútornej strany zeleného uzáveru vyčnieva tyčinka so závitom na konci. Ponorte koniec tyčinky (celý závit) do 3 rôznych častí stolice. Kúskom toaletného papiera alebo papierovou vreckovkou utrite koniec tyčinky tak, aby zostalo iba malé množstvo stolice v ryhách závitú. Na test postačuje množstvo stolice zachytené v ryhách závitú! (viď obrázok).

4. Ponorte tyčinku so zachytenou vzorkou do skúmavky, pevne zaskrutkujte (obe časti uzáveru musia byť dobre zaskrutkované) a do 3 dní odneste svojmu lekárovi na otestovanie.

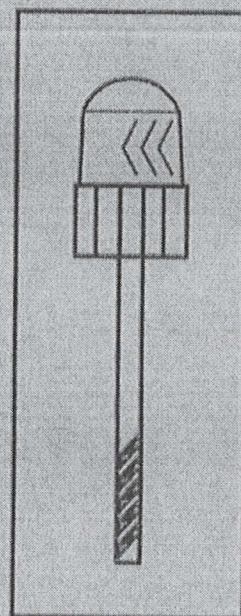

SPRÁVNY ODBER
- dostatočné množstvo stolice

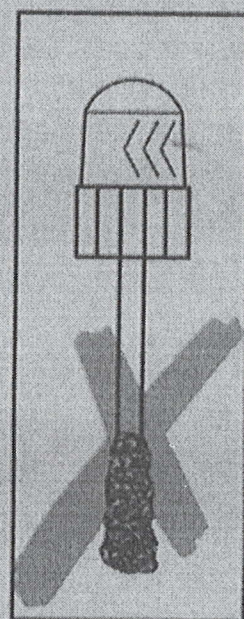

NESPRÁVNY ODBER
- príliš veľké množstvo stolice



**EUROLAB
LAMBDA**

DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKO:

Eurolab Lambda a.s., T. Milkina 2, 917 01 Trnava
tel.: 033-5341 448-9, eurolambda@eurolambda.sk